



VELA Salsa

MALLI:

100/110/120/130/400

Käyttöohje nro 105043



VELA Salsa 100



VELA Salsa 110



VELA Salsa 130



VELA Salsa 120



VELA Salsa 400

ISO 9001
ISO 14001

Tuolin muotoilu vaihtelee mallista

SISÄLTÖ

1.0. ESITTELY	3
1.1. VAROITUKSET	4
1.2. ONGELMIEN KARTOITUS	5
1.3. TUOLISSA KÄYTETYT ETIKETIT	6
1.4. TURVALLISUUS	7
1.4.1. Käyttötarkoitus	7
1.4.2. Kuljetus	7
1.5. TAKUU	7
1.6. TUOLIN PURKU PAKKAUKSESTA	8
1.7. YLLÄPITO	8
1.7.1. Pyörät	8
1.7.2. Runko	8
1.7.3. Pehmuste	8
1.7.4. Kierrätysopas	8
1.8. KIERRÄTYS JA HÄVITYS	8
1.9. KÄYTTÖOHJEET	9
1.9.1. Selkänojan asennus*	9
1.9.2. Istuinkorkeuden säätäminen vivun avulla*	9
1.9.3. Istuinkorkeuden säätäminen*	9
1.9.4. Istuimen kallistuksen säätäminen*	9
1.9.5. Istuimen Kallistuksen Säätäminen*	10
1.9.6. Jarrut	10
1.9.7. Selkänojan korkeuden säätäminen*	10
1.9.8. Selkänojan kallistuksen säätäminen*	10
1.9.9. Käsinojan Korkeuden Säätäminen*	11
1.9.10. Käsinojan Leveyden Säätäminen*	11
1.9.11. Kierto*	11

HYVÄ ASIAKAS

Onnittelut uudesta VELA-tuolista! Olemme varmoja, että tuoli tulee ilahduttamaan sinua päivittäin. Tämä käyttöopas tarjoaa hyödyllistä tietoa tuolisi säätämisestä, käytöstä ja ylläpidosta.

Tärkeää tietoa

Ole hyvä ja tutustu käyttöoppaaseen huolellisesti. Pidä opas turvallisessa paikassa, jos tarvitset sitä myöhemmin. Käyttöopas on saatavilla myös VELA:n verkkosivuilla: www.vela.eu, josta löydät oppaan lisäksi myös muuta hyödyllistä tietoa.

Jos sinulla herää kysyttävää, huomaat virheitä tai haittatapahtumia, ota yhteyttä VELA-toimittajaasi.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

VELA

Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg SV
Tanska
www.vela.eu

1.1. VAROITUKSET



Käyttö	Allergisen reaktion ilmetessä lopeta tuolin käyttö ja konsultoi lääkärää.
Käyttö	Käytä vain VELA:n alkuperäisiä varaosia.
Käyttö	Älä tee muutoksia tuolin mukana tuleviin tarvikkeisiin.
Käyttö	Käytä tuolia sen asianmukaisessa käyttötarkoituksessa.
Käyttö	Ennen istuinkulman tai selkärangan kulman säätöä, varmista, että käyttäjä istuu tuolissa niin, että jalat lepäävät litteää lattiaa kohden.
Käyttö	Pidä tuolijarru päällä, kun istahdat tai nouset ylös tuolista.
Käyttö	Epävakauden välttämiseksi älä koskaan käytä tuolia pinnoilla, joilla on tasoeroja.
Käyttö	Huolto tulee suorittaa aina ammattilaisen toimesta, pois lukien puhdistus.
Käyttö	Älä koskaan huolla tuolia käytön aikana.
Käyttö	Seuraa aina suositeltuja huolto- ja puhdistusohjeita.
Käyttö	Tuolin toiminnot on tarkoitettu käyttäjälle. Jos käyttäjä istuu tuolilla, tuolin säätö voidaan suorittaa vain käyttäjän tai koulutetun ammattilaisen toimesta.
Käyttö	Liikkuvisissa osissa on sormien katkeamis- ja puristusvaara. Älä koskaan käytä tuolia jonkun koskettaessa tuolin alaosaa.
Tukehtumisvaara	Pienissä osissa on tukehtumisvaara. Koska pienet osat ovat irrotettavissa, älä koskaan anna lasten leikkiä tuolin kanssa.

1.2. ONGELMIEN KARTOITUS

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Manuaalinen korkeuden säätö ei toimi	Tuolin kuorma on liiallinen tai epätasainen. Kokeile säätää tuolin korkeutta istumatta tuolilla. Jos tämä ei auta, kaasupatruuna on vioittunut ja tulee vaihtaa. Ota yhteyttä VELA-toimittajaasi.
Jarrutoiminto ei toimi	Jarru ei ole aktivoitu. Katso kohta 1.9.6
Käsinoja vaikuttaa löysältä	Yksi ruuveista saattaa olla löystynyt. Kiristä ruuvia.
Tuoli rullaa huonosti	Pyörät ovat tukossa. Puhdista pyörät kaapelijäämien tai vastaavien varalta.
Jarruvarsi tai alusta on tiellä, kun liikun tuolissa	Tuolissasi on istuinkierto. Käytä istuinkiertoa suoristaaksesi tuolin. Katso kohta 1.9.11.
Selkänöjan varsi liukuu alaspäin	Kiristä käsiruuvia edelleen, kuten kohdassa 1.9.1 on esitetty. Voit kiristää käsiruuvia lujasti vahingoittamatta tuotetta

Jos yllä olevat eivät ratkaise ongelmaasi, ota yhteyttä VELA -toimittajaasi.

1.3. TUOLISSA KÄYTETYT ETIKETIT

Varoitus	Katkeamis- ja puristusvaara: pidä kädet ja sormet poissa liikkuvista osista	
Merkit	60 x 22.5 mm Kuusi viimeistä numeroa ovat tuotteen tunnistenumero:	

Tuolin etiketit tulisi lukea n. 40 cm etäisyydeltä normaalissa päivänvalossa. Mitä tulee tuolin käyttöä koskeviin etiketteihin, ole hyvä ja tarkista kohta 1.9.

1.4. TURVALLISUUS

Tämä tuoli on CE-merkitty ja noudattaa sovellettavia EU-määräyksiä.

Tuolin valmistaja:

VELA, Gøteborgvej 8-12,
9200 Aalborg SV, Tanska.

1.4.1. KÄYTTÖTARKOITUS

Laitteen käyttötarkoitus on tukea käyttäjän istuma-asentoa arkisten sisätiloissa tapahtuvien askareiden aikana, mukaan lukien työtehtävissä.

- :: Tuolia ei ole rakennettu seisomista varten
- :: Pyöräjarrun tulee olla aktivoituna aina tuolille istahtaessa tai noustessa ylös

Kaikki tämän tuolin variantit on testattu ja hyväksytty vastaamaan 125 kg enimmäiskuormitusta. Tuolille on asetettu suositeltu painoraja optimaalisen käytön varmistamiseksi. Tämä raja on 40–110 kg.

1.4.2. KULJETUS

Käytä kuljetuksessa tuolijarrua – kuljetitpa tuolia sitten autolla, lentokoneella tai muulla kuljetusvälineellä. Tuolia ei tule kuljettaa matkustajan paikalla tai käyttää sellaisena.

Tuoli on suunniteltu kuljetettavaksi seuraavien ympäristöolosuhteiden alaisuudessa:

Lämpötila: - 20°C - 60°C

Kosteus: 15-95 %

Anna tuolin seistä 24 tuntia ennen käyttöä, jos tuoli on varastoitu alle -10°C.

1.5. TAKUU

VELA myöntää valitusoikeuden sovellettavan lain nojalla siinä maassa, josta tuoli hankitaan. Valitusoikeus koskee vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita sekä ammattilaisten suorittamia räätälöintitoimenpiteitä.

Huom: edellä mainittua sovelletaan, jos yksinoikeussopimus on tehty suoraan VELA:n kanssa!

VELA ei vastaa tuotteelle tai käyttäjälle aiheutuneista vahingoista, jos vahingot aiheutuvat seuraavista syistä:

- :: Kuljetus
- :: Väärinkäyttö
- :: Tavanomainen kuluminen
- :: Vääränlainen käyttö
- :: Varaosien ja tarvikkeiden käyttö, jotka eivät ole alkuperäisiä VELA-tuotteita
- :: Valtuuttamattomien huoltoteknikoiden tekemät säädöt

1.6. TUOLIN PURKU

PAKKAUKSESTA

Tuoli toimitetaan ympäristöystävällisessä ja kierrätettävässä pakkauksessa.

Jos havaitset tuolissa vikoja tai kuljetusvaurioita, ole hyvä ja ota välittömästi yhteyttä VELA-toimittajaasi. Tällaisissa tapauksissa tuolia ei tule käyttää tai yrittää korjata itse.

Toimituksessa vastaanotat:

:: VELA-tuoli

:: Käyttöopas

Huom: tarkista kohta 1.9.1 asianmukaisen selkänöjan kiinnityksen varmistamiseksi.

1.7. YLLÄPITO

Suosittellemme tuolin vuositarkastusta viallisten tai kuluneiden osien tunnistamiseksi. Kaikki irrotettavat osat on kiristettävä säännöllisesti. Erilaisia oppaita löydät osoitteesta www.vela.eu.

1.7.1. PYÖRÄT

Suosittellemme, että tarkistat pyörät säännöllisesti ja poistat jäljelle jääneet kierteet, jne.

1.7.2. RUNKO

Puhdista haalealla vedellä ja lisää tarvittaessa pH-neutraalia pesuainetta.

1.7.3. PEHMUSTE

Kangas: Puhdista kemiallisella puhdistuksella huonekaluille tarkoitetuilla puhdistusaineilla tai vedellä kuivaksi käännettyä kangasta hyödyntäen.

Synteettinen kangas tai nahka:

Puhdista vedellä tai miedolla saippualla kuivaksi käännettyä kangasta hyödyntäen.

Nahka: Puhdista imuroimalla pehmeällä harjalla. Vältä pesuaineiden käyttöä.

Huom: Osoitteesta www.vela.eu löydät puhdistusohjeet kaikille vakioverhoilutyypeillemme.

1.7.4. KIERRÄTYSOPAS

Jos et enää tarvitse VELA-tuoliasi, toinen henkilö voi käyttää sitä teknikon suorittaman huollon jälkeen.


Tuolin elinajanodote on viisi vuotta säännöllisessä, asianmukaisessa käytössä, kunhan VELA, VELA-toimittaja tai koulutettu ammattilainen suorittaa vuosittaisen tarkastuksen kuluneiden osien tunnistamiseksi.

1.8. KIERRÄTYS JA HÄVITYS

Tämä tuote sisältää kierrätettäviä materiaaleja. Tuote on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti, ei yhdessä talousjätteen kanssa. Asianmukainen hävittäminen ja kierrätys auttavat ehkäisemään ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia.

1.9. KÄYTTÖOHJEET

Kaasujousen saa vaihtaa ainoastaan jälleenmyyjäsi huoltotiimi tai kokenut tekniikko.

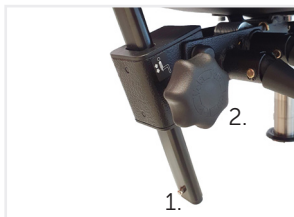

1.9.1. SELKÄNOJAN ASENNUS*

Paina lukitusjousta (1) ja työnnä selkänojan varsi reiän läpi. Kiinnitä ruuvi (2).

Huomio: Selkänojan varsi tulee työntää läpi niin, että lukitusjousi lukitsee selkänojan varren. Varmista, että selkänojan varsi ei irtoa vetämällä.



1.9.2. ISTUINKORKEUDEN SÄÄTÄMINEN VIVUN AVULLA*

Voit säätää istuimen korkeutta painamalla oikealla puolella olevaa vipua alaspäin.



1.9.3. ISTUINKORKEUDEN SÄÄTÄMINEN*

Voit säätää istuimen korkeutta painamalla vasemmalla puolella olevaa vipua alaspäin.



1.9.4. ISTUIMEN KALLISTUKSEN SÄÄTÄMINEN*

Voit säätää istuimen kallistusta painamalla oikealla puolella olevaa keskimmäistä vipua alaspäin.


* Riippuu mallista

Huomio: selkänojan ja istuimen kulman säätäminen tulee tehdä niin, että jalat ovat lattialla.



1.9.5. ISTUIMEN KALLISTUKSEN SÄÄTÄMINEN*

Voit säätää istuimen kallistusta painamalla oikealla puolella olevaa vipua alaspäin.

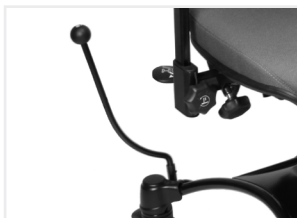

1.9.6. JARRUT

Voit laittaa tuolin jarrun päälle kääntämällä rungon sivussa olevaa jarruvipua eteenpäin. Jos haluat ottaa jarrun pois päältä, käännä jarruvipua taaksepäin niin, että se on pystyasennossa.

Huomaa: Voit vaihtaa jarruvivun puolelta toiselle. Avaa jarruvivun alaosassa oleva ruuvi, irrota vastakkaisen puolen aukon muovisuojuus ja aseta jarruvipu vastakkaisen puolen aukkoon. Kiristä ruuvi kunnolla paikoilleen.



1.9.7. SELKÄNOJAN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN*

Säädä selkänojan korkeus tuolin takana olevalla ruuvilla. Kiristä ruuvi jälkikäteen.



1.9.8. SELKÄNOJAN KALLISTUKSEN SÄÄTÄMINEN*

Voit säätää selkänojan kallistusta painamalla oikealla puolella takimmaisena olevaa vipua alaspäin.

Käytä kahvaa vain, kun joku istuu tuolissa – selkänoja kallistuu eteenpäin.



1.9.9. KÄSINOJAN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN*

Voit säätää käsinojan korkeutta löysäämällä käsinojan tangossa olevaa sormiruuviä ja asettamalla käsinojan haluamallesi korkeudelle. Kiristä sitten sormiruuvi kunnolla paikoilleen.

Huomaa: Käsinoja voidaan poistaa kokonaan avaamalla käsinojan ruuvi ja vetämällä käsinojan tanko ylös.



1.9.10. KÄSINOJAN LEVEYDEN SÄÄTÄMINEN*

Voit säätää käsinojan leveyttä löysäämällä istuimen alla olevaa sormiruuviä ja säätämällä käsinojat sopivalle leveydelle. Kiristä sitten sormiruuvi kunnolla paikoilleen.

Huomaa: Käsinojat voidaan poistaa kokonaan työntämällä sauvan alaosaan oleva nuppijousi pohjaan ja vetämällä käsinoja ulos, kun käsiruuvia löysätään.



1.9.11. KIERTO*

Istuinta pyöritetään vetämällä vasemmalla puolella olevaa etukahvaa.

** Riippuu mallista*

