


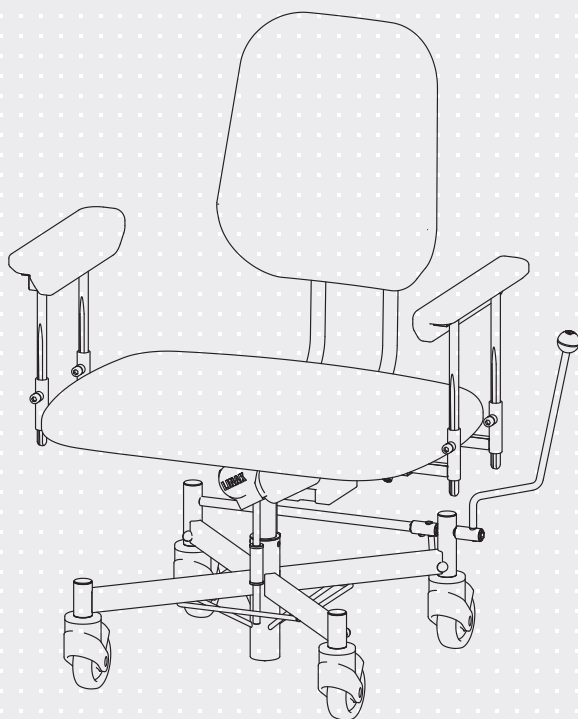

VELA Tango

MALLI: 300, 300E & 310E

Käyttöohje nro 105482

ISO 9001
ISO 14001*Tuolin muotoilu vaihtelee mallista*

SISÄLTÖ

1.0. ESITTELY	3
1.1. VAROITUKSET	4
1.2. ONGELMIEN KARTOITUS	5
1.3. VELA TANGO SÄHKÖISELLÄ KORKEUDEN SÄÄDÖLLÄ	6
1.3.1. Virransyöttö	6
1.3.2. Päästö	6
1.4. TUOLISSA KÄYTETTY ETIKETIT	6
1.5. TURVALLISUUS	7
1.5.1. Käyttötarkoitus	7
1.5.2. Kuljetus	7
1.6. TAKUU	8
1.7. TUOLIN PURKU PAKKAUKSESTA	8
1.8. YLLÄPITO	8
1.8.1. Pyörät	8
1.8.2. Runko	8
1.8.3. Pehmuste	8
1.8.4. Kierrätysopas	9
1.9. KIERRÄTYS JA HÄVITYS	9
2.0. KÄYTTÖOHJEET	10
2.0.1. Istuinkorkeuden säätäminen (sähköinen)*	10
2.0.2. Istuinkorkeuden säätäminen (kaasulla)*	10
2.0.3. Kauko-ohjain (sähköinen)*	10
2.0.4. Sääto istuinsyvyys	10
2.0.5. Selkänojan lukitsin	11
2.0.6. Selkänojan korkeuden säätäminen	11
2.0.7. Käsinojan korkeuden säätäminen	11
2.0.8. Käsinojan leveyden säätäminen	11
2.0.9. Jarrut	12
2.0.10. Lataaminen (sähköinen)*	12
2.0.11. Työntökahva*	12
2.0.12. Sähköinen jarru (sähköinen)*	12

HYVÄ ASIAKAS

Onnittelut uudesta VELA-tuolista! Olemme varmoja, että tuoli tulee ilahduttamaan sinua päivittäin. Tämä käyttöopas tarjoaa hyödyllistä tietoa tuolisi säätämisestä, käytöstä ja ylläpidosta.

Tärkeää tietoa

Ole hyvä ja tutustu käyttöoppaaseen huolellisesti. Pidä opas turvallisessa paikassa, jos tarvitset sitä myöhemmin. Käyttöopas on saatavilla myös VELA:n verkkosivuilla: www.vela.eu, josta löydät oppaan lisäksi myös muuta hyödyllistä tietoa.

Jos sinulla herää kysyttävää, huomaat virheitä tai haittatapahtumia, ota yhteyttä VELA-toimittajaasi.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

VELA

Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg SV
Tanska
www.vela.eu

1.1. VAROITUKSET



Käyttö	Allergisen reaktion ilmetessä lopeta tuolin käyttö ja konsultoi lääkärää.
Käyttö	Käytä vain VELA:n alkuperäisiä varaosia.
Käyttö	Käytä vain tuolin mukana tullutta laturia.
Käyttö	Älä tee muutoksia tuolin mukana tuleviin tarvikkeisiin.
Käyttö	Käytä tuolia sen asianmukaisessa käyttötarkoituksessa.
Käyttö	Pidä tuolijarru päällä, kun istahdat tai nouset ylös tuolista.
Käyttö	Epävakauden välttämiseksi älä koskaan käytä tuolia pinnoilla, joilla on tasoeroja.
Käyttö	Huolto tulee suorittaa aina ammattilaisen toimesta, pois lukien puhdistus.
Käyttö	Älä koskaan huolla tuolia käytön aikana.
Käyttö	Seuraa aina suositeltuja huolto- ja puhdistusohjeita.
Käyttö	Tuolin toiminnot on tarkoitettu käyttäjälle. Jos käyttäjä istuu tuolilla, tuolin säätö voidaan suorittaa vain käyttäjän tai koulutetun ammattilaisen toimesta.
Käyttö	Älä koskaan käytä sähköistä korkeuden säätöä pidempään kuin kaksi minuuttia kerralla.
Käyttö	Sähkövirheen tai tahattoman korkeuden säädön ilmetessä, paina molempia korkeuden säätöpainikkeita samanaikaisesti 10 sekunnin ajan.
Käyttö	Liikkuissa osissa on sormien katkeamis- ja puristusvaara. Älä koskaan käytä tuolia jonkun koskettaessa tuolin alaosa.
Tukehtumisvaara	Pienissä osissa on tukehtumisvaara. Koska pienet osat ovat irrotettavissa, älä koskaan anna lasten leikkiä tuolin kanssa.
Tukehtumisvaara	Jos tuoli on varustettu sähköisellä korkeuden säädöllä, kaapelit ovat esillä. Älä koskaan anna lasten leikkiä kaapeleilla.
Sähkömelu	Muiden kuin vakiokaapeleiden käyttö saattaa lisätä sähkön säteilyä tai vähentää sähkövastetta.
Sähkömelu	Vältä tuolin sijoittamista lähelle laitteita, jotka päästävät sähkömelua.
Sähkömelu	Tuolia voidaan käyttää tässä käyttöoppaassa mainittujen lisävarusteiden kanssa. Muissa tapauksissa sähkömagneettisen säteilyn ilmeneminen on mahdollista.
Sähkömelu	Jos tuoli liikkuu tahattomasti tai ei toimi odotetulla tavalla, etsi tuolille toinen paikka.

1.2. ONGELMIEN KARTOITUS

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Elektroninen korkeuden säätö ei toimi	Tuolin akussa ei ole virtaa. Lataa akku tuolin mukana toimitetulla laturilla.
Manuaalinen korkeuden säätö ei toimi	Tuolin kuorma on liiallinen tai epätasainen. Kokeile säätää tuolin korkeutta istumatta tuolilla. Jos tämä ei auta, kaasupatruuna on vioittunut ja tulee vaihtaa. Ota yhteyttä VELA-toimittajaasi.
Jarrutoiminto ei toimi	Jarru ei ole aktivoitu. Katso kohta 2.0.9.
Käsinoja vaikuttaa löysältä	Yksi ruuveista saattaa olla löystynyt. Kiristä ruuvia.
Tuoli rullaa huonosti	Pyörät ovat tukossa. Puhdista pyörät kaapelijäämien tai vastaavien varalta.

Jos yllä olevat eivät ratkaise ongelmaasi, ota yhteyttä VELA -toimittajaasi.

1.3. VELA TANGO SÄHKÖISELLÄ KORKEUDEN SÄÄDÖLLÄ

1.3.1. VIRRANSYÖTTÖ

Jännite: 24Vdc

Sähkövirta: 0.5A

Teho: 12VA

1.3.2. PÄÄSTÖ

Sähköisillä toiminnoilla varusteltu VELA-tuoli on testattu ja täyttää tämänhetkiset sähkömagneettista säteilyä koskevat vaatimukset (EMC-vaatimukset). Tuoli on testattu seuraavien vaatimusten mukaisesti:

:: Päästöluokka CISPR 11, Ryhmä 1, Luokka B

Lisätietoa osoitteessa www.vela.eu

1.4. TUOLISSA KÄYTETYT ETIKETIT

Varoitus	Katkeamis- ja puristusvaara: pidä kädet ja sormet poissa liikkuvista osista	
Symboli	Lue "Käyttöopas" ennen käyttöä	
Symboli	Käytetty osa: Tyyppi B cf. IEC60601-1 kattaen seuraavat tuolin osat:	
Merkit	60 x 22,5 mm Kuusi viimeistä numeroa ovat tuotteen tunnistenumero: Tämä merkki koskee vain sähköisillä toiminnoilla varusteltuja tuoleja: Tuoli on IP21-hyväksytty, mikä vastaa tippuvesitiivistä, sekä suojaa sormella koskettuja vaarallisia osia vastaan.	<div><p><Model name> <Model ref. no.> <Manufacturer> <Address> <Webpage></p><p>CE MEDICO <Safe working load> <Production date/order no.></p><p>UDI: (XX) xxxxxxxxxxxxxxxx (XX) xxxxxxx</p></div> <div><p> Follow instructions for use</p><p> EN60601-1 IP21 Blade fuse: 10A/32V,</p><p>Duty cycle: 10%, max. 2min/18min</p><p>Input: 24V== 0.5A Storage limits -20°C / 60°C</p></div>

Tuolin etiketit tulisi lukea n. 40 cm etäisyydeltä normaalissa päivänvalossa. Mitä tulee tuolin käyttöä koskeviin etiketteihin, ole hyvä ja tarkista kohta 2.0.

1.5. TURVALLISUUS

Tämä tuoli on CE-merkitty ja noudattaa sovellettavia EU-määräyksiä. Tuolin valmistaja:
VELA, Gøteborgvej 8-12,
9200 Aalborg SV, Denmark.

Sähköisillä toiminnoilla varusteltu VELA Tango 300/310 täyttää kaikki IEC 60601-1 mukaiset turvallisuusvaatimukset, mukaan lukien IEC60601-1-2 mukaiset EMC-vaatimukset.

1.5.1. KÄYTTÖTARKOITUS

Laitteen käyttötarkoitus on tukea bariatrisen käyttäjän istuma-asentoa arkisten sisätiloissa tapahtuvien askareiden aikana, mukaan lukien työtehtävissä.

- :: Tuolia ei ole rakennettu seisomista varten
- :: Pyöräjarrun tulee olla aktivoituna aina tuolille istahtaessa tai noustessa ylös

Kaikki VELA Tango 300* vakiovariantit on testattu ja hyväksytty vastaamaan 200 kg enimmäiskuormitusta. Tuolille on asetettu suositeltu painoraja optimaalisen käytön varmistamiseksi. Painoraja on 130-175 kg.

*VELA Tango 300 manuaalinen korkeuden-säätö variantit on testattu ja hyväksytty vastaamaan 175 kg enimmäiskuormitusta. Tuolille on asetettu suositeltu painoraja optimaalisen käytön varmistamiseksi. Painoraja on 130-160 kg.

Kaikki VELA Tango 310 variantit on testattu ja hyväksytty vastaamaan 300 kg enimmäiskuormitusta. Tuolille on asetettu suositeltu painoraja optimaalisen käytön varmistamiseksi. Painoraja on 130-250 kg.

1.5.2. KULJETUS

Käytä kuljetuksessa tuolijarrua - kuljetitpa tuolia sitten autolla, lentokoneella tai muulla kuljetusvälineellä. Tuolia ei tule kuljettaa matkustajan paikalla tai käyttää sellaisena.

Tuoli on suunniteltu kuljetettavaksi seuraavien ympäristöolosuhteiden alaisuudessa:

Lämpötila: - 20°C - 60°C

Kosteus: 15-95 %

Anna tuolin seistä 24 tuntia ennen käyttöä, jos tuoli on varastoitu alle -10°C.

1.6. TAKUU

VELA myöntää valitusoikeuden sovellettavan lain nojalla siinä maassa, josta tuoli hankitaan. Valitusoikeus koskee vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita sekä ammattilaisten suorittamia räätälöintitoimenpiteitä. **Huom:** edellä mainittua sovelletaan, jos yksinoikeussopimus on tehty suoraan VELA:n kanssa!

VELA ei vastaa tuotteelle tai käyttäjälle aiheutuneista vahingoista, jos vahingot aiheutuvat seuraavista syistä:

- :: Kuljetus
- :: Väärinkäyttö
- :: Tavanomainen kuluminen
- :: Vääränlainen käyttö
- :: Varaosien ja tarvikkeiden käyttö, jotka eivät ole alkuperäisiä VELA-tuotteita
- :: Valtuuttamattomien huoltoteknikoiden tekemät säädöt

1.7. TUOLIN PURKU PAKKAUKSESTA

Tuoli toimitetaan ympäristöystävällisessä ja kierrätettävässä pakkauksessa.

Jos havaitset tuolissa vikoja tai kuljetusvaurioita, ole hyvä ja ota välittömästi yhteyttä VELA-toimittajaasi. Tällaisissa tapauksissa tuolia ei tule käyttää tai yrittää korjata itse.

Toimituksessa vastaanotat:

- :: VELA-tuoli
- :: Käyttöopas
- :: Laturi (vain sähköisillä toiminnoilla varustetuille tuoleille)

1.8. YLLÄPITO

Suosittelemme tuolin vuositarkastusta viallisten tai kuluneiden osien tunnistamiseksi. Kaikki irrotettavat osat on kiristettävä säännöllisesti. Erilaisia oppaita löydät osoitteesta www.vela.eu.

1.8.1. PYÖRÄT

Suosittelemme, että tarkistat pyörät säännöllisesti ja poistat jäljelle jääneet kierteet, jne.

1.8.2. RUNKO

Puhdista haalealla vedellä ja lisää tarvittaessa pH-neutraalia pesuainetta.

1.8.3. PEHMUSTE

Kangas: Puhdista kemiallisella puhdistuksella huonekaluille tarkoitetuilla puhdistusaineilla tai vedellä kuivaksi käännettyä kangasta hyödyntäen.

Synteettinen kangas tai nahka:

Puhdista vedellä tai miedolla saippualla kuivaksi käännettyä kangasta hyödyntäen.

Nahka: Puhdista imuroimalla pehmeällä harjalla. Vältä pesuaineiden käyttöä.

Huom: Osoitteesta www.vela.eu löydät puhdistusohjeet kaikille vakioverhoilutyypeillemme.

1.8.4. KIERRÄTYSOPAS

Jos et enää tarvitse VELA-tuoliasi, toinen henkilö voi käyttää sitä teknikon suorittaman huollon jälkeen.

Tuolin elinajanodote on viisi vuotaa säännöllisessä, asianmukaisessa käytössä, kunhan VELA, VELA-toimittaja tai koulutettu ammattilainen suorittaa vuosittaisen tarkastuksen kuluneiden osien tunnistamiseksi.

1.9. KIERRÄTYS JA HÄVITYS

Tämä tuote sisältää kierrätettäviä materiaaleja. Tuote on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti, ei yhdessä talousjätteen kanssa. Asianmukainen hävittäminen ja kierrätys auttavat ehkäisemään ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia.

Huom: Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niiden akut sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka saattavat olla haitallisia ihmisen terveydelle ja ympäristölle, jos jätteitä ei käsitellä oikein.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja akut on merkitty alla olevalla ikonilla. Tämä symboloi sitä, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai akkuja tule hävittää yhdessä lajittelemattoman kotitalousjätteen kanssa, vaan ne on kerättävä erikseen.

On tärkeää palauttaa käytetyt akut vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Näin autat varmistamaan, että akut kierrätetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, eivätkä akut pääse aiheuttamaan tarpeetonta haittaa ympäristölle.




2.0. KÄYTTÖOHJEET

Vain jälleenmyyjän valtuuttama huolto tai pätevä teknikko saa vaihtaa kaasujousen.



2.0.1. ISTUINKORKEUDEN SÄÄTÄMINEN (SÄHKÖINEN)*

Voidaan käyttää painamalla kytkintä, joka sijaitsee oikean tai vasemman käsinojan sivulla.

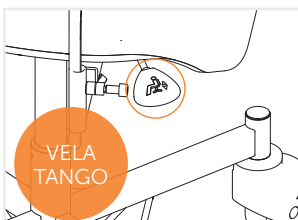

2.0.2. ISTUINKORKEUDEN SÄÄTÄMINEN (KAASULLA)*


Voit säätää istuimen korkeutta vetämällä oikealla puolella etummaisena olevaa vipua ylöspäin.



2.0.3. KAUKO-OHJAIN (SÄHKÖINEN)*


Tuolin toimintoja voi ohjata kauko-ohjaimen painikkeiden avulla. VELA-kauko-ohjaimilla voi käyttää yhtä tai useampaa toimintoa. Kauko-ohjaimen kuvakkeet ilmoittavat, mitä toimintoja käytetään milläkin painikkeella.

Huomaa: Saatavissa myös korkeudensäätö kautta käsinojat

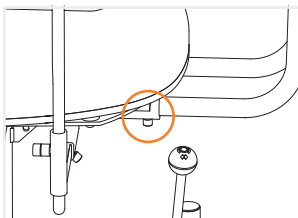


2.0.4. SÄÄTÖ ISTUINSYVYYS

Istuimen syvyyttä säädetään löysäämällä 2 unbrako-pulttia istuimen alla (selkänöjan varren vieressä), minkä jälkeen voit työntää selkänöjaa edestakaisin. Muista kiristää unbrako pultit huolellisesti uudelleen säätämisen jälkeen istuinsyvyyttä.

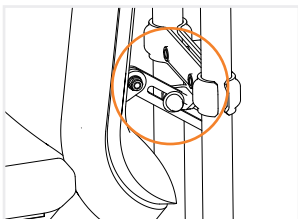


2.0.5. SELKÄNOJAN LUKITSIN

Voit kallistaa selkänöjää haluamaasi kulmaan säätämällä selkänöjan takana olevaa pulttia ja kiristämällä pultin uudelleen kiinni.

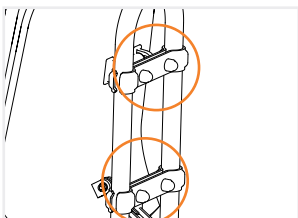


2.0.6. SELKÄNOJAN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

Selkänöjan korkeutta säädetään löysäämällä 4 unbrako-pulttia, jotka asetetaan selkänöjan varren taakse. Kun ne ovat löysät, selän korkeutta voidaan säätää. Muista kiristää unbrako pultit huolellisesti uudelleen.

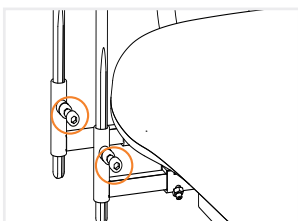

2.0.7. KÄSINOJAN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

Säätää avaamalla molemmat ruuvit alla käsinojan tankoon ja korkeutta säätämällä käsinojan. Muista kiristää ruuvit kunnolla uudelleen.

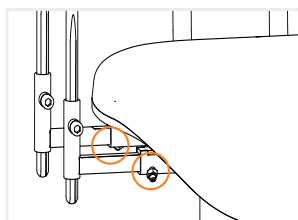


2.0.8. KÄSINOJAN LEVEYDEN SÄÄTÄMINEN

Säädä avaamalla molemmat ruuvit istuimen alla. Muista kiristää ruuvit kunnolla uudelleen.

Huomaa: Käsinojat saa säätää ylös, kunnes punainen 'seis' merkki.

* Riippuu mallista

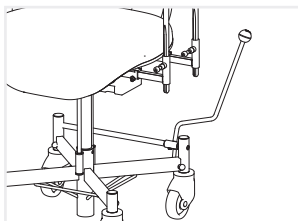

2.0.9. JARRUT

Voit laittaa tuolin jarrun päälle kääntämällä rungon sivussa olevaa jarruvipua eteenpäin. Jos haluat ottaa jarrun pois päältä, käännä jarruvipua taaksepäin niin, että se on pystyasennossa.


Huomaa: Saatavana jarru asennettuna oikealle tai vasemmalle puolelle.



2.0.10. LATAAMINEN (SÄHKÖINEN)*


Tuolin akku kannattaa ladata päivittäin. Kytke liitin laturiin. Kun tuolin akkua ladataan, laturin LED-valo palaa keltaisena. Kun tuolin akku on täynnä, LED-valo muuttuu vihreäksi.

Huomaa: Älä käytä tuolia lataamisen aikana.

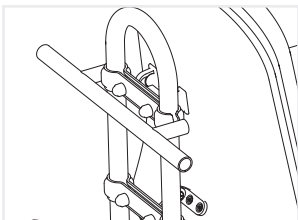

2.0.11. TYÖNTÖKAHVA*

Työntökahvan avulla tuolin käyttäjää voi siirtää helposti paikasta toiseen. Työntökahva voidaan säätää korkeuteen.

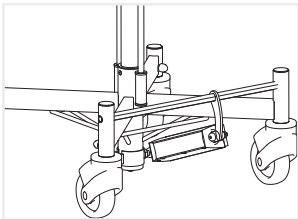

2.0.12. SÄHKÖINEN JARRU (SÄHKÖINEN)*

Jos VELA Tango -tuolissaan on sähköinen nelipyöräinen jarru, voit kytkeä jarrun päälle ja pois päältä kaukosäätimellä. Jarru kannattaa aina pitää joko täysin päällä tai täysin pois päältä.

Huomaa: Toimintoa voi ohjata vain kauko-ohjaimen.

* Riippuu mallista