





VELA Tango

MALLI: 700 & 700E

Käyttöohje nro 105683

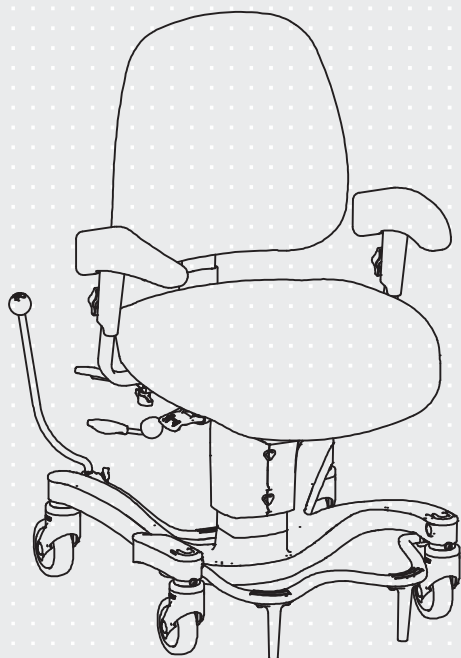

VELA Tango 700

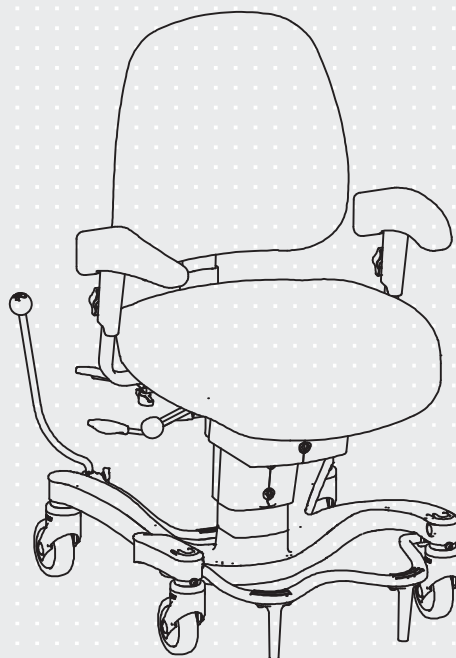

VELA Tango 700E




ISO 9001
ISO 14001

TUOLIN TOIMINNOT



ALOITTAMINEN

- 1 Pysäytä tuoli ja istu taaksepäin istuimelle.
- 2 Istuimen ja polvien väliin tulisi jäädä noin 3 cm.
- 3 Sääda istuimen kulma ja korkeus niin, että istut mukavasti ja jalat ovat tasaisesti lattialla.
- 4 Sääda selkänöjan korkeutta ja kulmaa, jotta istuinsyvyvyyttä voidaan säätää ja alaselkä ja selkä saavat tukea.
- 5 Sääda käsinojien leveys ja korkeus niin, että kynärvarsiasi lepäävät käsinojan pehmusteella.

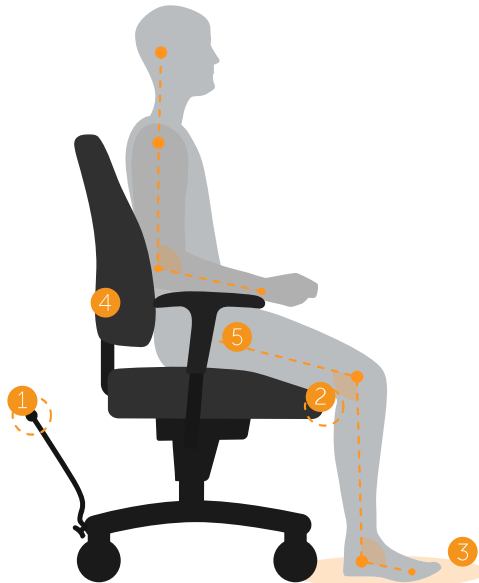

vela.my/GetStarted

SISÄLTÖ

1.0. JOHDANTO	5
1.1. VAROITUKSET	6
1.2. ONGELMIEN KARTOITUS	7
1.3. VELA TANGO SÄHKÖISELLÄ KORKEUDEN SÄÄDÖLLÄ	8
1.3.1. Virransyöttö	8
1.3.2. Päästö	8
1.3.3. Ylijännitesuoja	8
1.4. TUOLISSA KÄYTETYT ETIKETIT	9
1.5. EU-VAATIMUSTENMUKAISUUS	9
1.5.1. Käyttötarkoitus	9
1.5.2. Kuljetus	10
1.6. TAKUU	10
1.7. TUOLIN PURKU PAKKAUKSESTA	10
1.8. YLLÄPITO	11
1.8.1. Pyörät	11
1.8.2. Runko	11
1.8.3. Pehmuste	11
1.8.4. Kierrätysopas	11
1.9. KIERRÄTYS JA HÄVITYS	11
2.0. KÄYTTÖOHJEET	14
2.0.1. Selkänojan kiinnittäminen*	14
2.0.2. Korkeuden säätäminen (sähköinen)	14
2.0.3. Korkeudensäätöpaikan vaihtaminen*	14
2.0.4. Korkeuden säätäminen (käsikäyttö)	15
2.0.5. Istuinkulman säätäminen*	15
2.0.6. Istuimen kallistuksen säätö	15
2.0.7. Selkäkulman säätäminen	15
2.0.8. Istuinsyvyyden säätäminen	16
2.0.9. Selkänojan korkeuden säätäminen*	16
2.0.10. Selkänojan pultti*	16
2.0.11. Lannerangan tuen säätäminen (alb-selkänoja)*	16
2.0.12. Käsinojan korkeuden säätäminen*	17
2.0.13. Käsinojan leveyden säätäminen*	17
2.0.14. Laskettava käsinoja*	17
2.0.15. Istuimen rotaatio*	17
2.0.16. Käsijarru	18
2.0.17. Jarrupoljin	18
2.0.18. Jarrukulman asetus*	18
2.0.19. Istuimen vaihto	18
2.0.20. Lataaminen (sähköinen)	19
2.0.21. Kulmikas säätöpainike (sähköinen)*	19
2.0.22. Korkeuden säätäminen - käsiohjain (sähköinen)	19
2.0.23. Sähköinen jarru (sähköinen)*	19
2.0.24. Taattuva jalkakaari*	20
2.0.25. Sivulle asennettava pyörivä jalkatuki*	20
2.0.26. Työntökahva*	20
2.0.27. 4-Pyöräinen jarru*	20
2.0.28. Tarvikkeet	21

1.0. JOHDANTO

HYVÄ ASIAKAS

Onnittelut uudesta VELA-tuolista! Olemme varmoja, että tuoli tulee ilahduttamaan sinua päivittäin. Tämä käyttöopas tarjoaa hyödyllistä tietoa tuolisi säätämisestä, käytöstä ja ylläpidosta.

Tärkeää tietoa

Ole hyvä ja tutustu käyttöoppaaseen huolellisesti. Pidä opas turvallisessa paikassa, jos tarvitset sitä myöhemmin. Käyttöopas on saatavilla myös VELA:n verkkosivuilla: www.vela.eu, josta löydät oppaan lisäksi myös muuta hyödyllistä tietoa.

Jos sinulla herää kysyttävää, huomaat virheitä tai haittatapahtumia, ota yhteyttä VELA-toimittajaasi.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

VELA

Gøteborgvej 8-12
DK-9200 Aalborg SV
Tanska
www.vela.eu

1.1. VAROITUKSET



Käyttö	Allergisen reaktion ilmetessä lopeta tuolin käyttö ja konsultoi lääkärä.
Käyttö	Käytä vain alkuperäisiä VELA varaosia.
Käyttö	Käytä vain tuolin mukana tullutta laturia.
Käyttö	Älä tee muutoksia tuolin mukana tuleviin tarvikkeisiin.
Käyttö	Käytä tuolia sen asianmukaisessa käyttötarkoituksessa.
Käyttö	Ennen istuinkulman tai selkänojan kulman säätöä, varmista, että käyttäjä istuu tuolissa niin, että jalat lepäävät litteää lattiaa kohden.
Käyttö	Pidä tuolijarru päällä, kun istahdat tai nouse ylös tuolista.
Käyttö	Jarrutankoa voidaan käyttää vain jarrun operointiin. Jos jarrutankoa kuormitetaan liikaa, jarrutanko/pidike saattaa jarruuntua ja siten menettää toimintansa.
Käyttö	Sileillä pinnoilla kuten korkean kiillon lattioilla tai marmorilaatoilla tuoli saattaa liukua. Tässä suositellaan käytettäväksi 4-pyöräjarrua
Käyttö	Älä koskaan käytä tuolia epätasaisilla pinnoilla, mukaan lukien alueet, joilla on korkeuseroja tai irrallisia mattoja, sillä tämä voi aiheuttaa tuolin kaatumisvaaran
Käyttö	Huolto tulee suorittaa aina ammattilaisen toimesta, pois lukien puhdistus.
Käyttö	Älä koskaan huolla tuolia käytön aikana.
Käyttö	Seuraa aina suositeltuja huolto- ja puhdistusohjeita.
Käyttö	Tuolin toiminnot on tarkoitettu käyttäjälle. Jos käyttäjä istuu tuolilla, tuolin säätö voidaan suorittaa vain käyttäjän tai koulutetun ammattilaisen toimesta.
Käyttö	Älä koskaan käytä sähköistä korkeuden säätöä pidempään kuin kaksi minuuttia kerralla.
Käyttö	Liikkuvissa osissa on sormien katkeamis- ja puristusvaara. Älä koskaan käytä tuolia jonkun koskettaessa tuolin alaosa.
Tukehtumisvaara	Pienissä osissa on tukehtumisvaara. Koska pienet osat ovat irrotettavissa, älä koskaan anna lasten leikkiä tuolin kanssa.
Tukehtumisvaara	Jos tuoli on varustettu sähköisellä korkeuden säädöllä, kaapelit ovat esillä. Älä koskaan anna lasten leikkiä kaapeleilla.
Sähköiset häiriöt	Muiden kuin vakiokaapeleiden käyttö saattaa lisätä sähkön säteilyä tai vähentää sähkövastetta.
Sähköiset häiriöt	Kannettavat RF-viestintälaitteet (mukaan lukien antennit) voivat vaikuttaa tämän laitteen suorituskykyyn. Tällaisia laitteita ei tule käyttää lähempänä kuin 30 cm mitään laitteen osaa tai sen kaapeleita, ellei VELA ole toisin ilmoittanut.
Sähköiset häiriöt	Tuolia voidaan käyttää tässä käyttöoppaassa mainittujen lisävarusteiden kanssa. Muissa tapauksissa sähkömagneettisen säteilyn ilmeneminen on mahdollista.
Sähköiset häiriöt	Jos tuoli liikkuu tahattomasti tai ei toimi odotetulla tavalla, etsi tuolille toinen paikka.

1.2. ONGELMIEN KARTOITUS

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Elektroninen korkeuden säätö ei toimi	Pistoketta ei ole kytketty käsilaatikkoon - kytke pistoke Tuolin akussa ei ole virtaa. Lataa akku tuolin mukana toimitetulla laturilla. Sulake on rikki. Katso kohta 1.3.3 Suorita toimilaitteen nollaus. Pidä molempia painikkeita (ylös ja alas) samanaikaisesti painettuna 20 sekunnin ajan. Pidä painikkeita painettuna, kunnes toimilaite on täysin vetäytynyt ja liikkuu sitten noin 5 mm ylöspäin.
Manuaalinen korkeuden säätö ei toimi	Tuolin kuorma on liiallinen tai epätasainen. Kokeile säätää tuolin korkeutta istumatta tuolilla. Jos tämä ei auta, kaasupatruuna on vioittunut ja tulee vaihtaa. Ota yhteyttä VELA-toimittajaasi.
Jarrutoiminto ei toimi	Jarru ei ole aktivoitu. Katso kohta 2.0.16-2.0.18., 2.0.23. tai 2.0.27.
Käsinoja vaikuttaa löysältä	Yksi ruuveista saattaa olla löystynyt. Kiristä ruuvia.
Tuoli rullaa huonosti	Pyörät ovat tukossa. Puhdista pyörät kaapelijäämien tai vastaavien varalta.
Jarruvarsi tai alusta on tiellä, kun liikun tuolissa	Tuolissasi on istuinkierto. Käytä istuinkiertoa suoristaaksesi tuolin. Katso kohta 2.0.15.
Jarrutanko vaikuttaa olevan löysällä	Jarrutankoa pitelevä käsiruuvi saattaa olla löysällä. Kiristä ruuvi. Katso kappale 2.0.18.

Jos yllä olevat eivät ratkaise ongelmaasi, ota yhteyttä VELA-toimittajaasi.

1.3. VELA TANGO SÄHKÖISELLÄ KORKEUDEN SÄÄDÖLLÄ

1.3.1. VIRRANSYÖTTÖ

Jännite: 24Vdc
Sähkövirta: 0.5A
Teho: 12VA

1.3.2. PÄÄSTÖ

Sähköisillä toiminnoilla varusteltu VELA-tuoli on testattu ja täyttää tämänhetkiset sähkömagneettista säteilyä koskevat vaatimukset (EMC-vaatimukset). Tuoli on testattu seuraavien vaatimusten mukaisesti:

:: Päästöluokka CISPR 11, Ryhmä 1, Luokka B

Lisätietoa osoitteessa www.vela.eu

1.3.3. YLIJÄNNITESUOJA

Tuoliin on asennettu sulake, joka suojaa tuolia ylijännitteeltä. Sulakkeessa on vaihdettava osa, jota koskevat seuraavat vaatimukset:

:: Litteä sulake, tyyppi: ATOF terässulake, nopeasti reagoiva

:: Jännite: 32V


:: Sähkövirta: 10A

:: Max. sähkövirta: 1000A

Sulakkeen vaihdon voi suorittaa vain koulutettu ammattilainen. Turvallisuussyistä rikkoutumisen syy on aina dokumentoitava.

YLEISTIETOA

1.4. TUOLISSA KÄYTETTY ETIKETIT

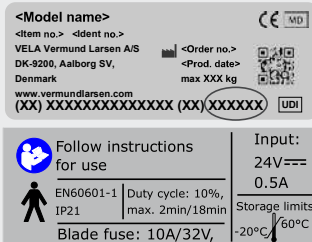Varoitus	Katkeamis- ja puristusvaara: pidä kädet ja sormet poissa liikkuvista osista	
Symboli	Lue "Käyttöopas" ennen käyttöä	
Symboli	Käytetty osa: Tyyppi B cf. IEC60601-1 kattaen seuraavat tuolin osat:	 
Merkit	60 x 22,5 mm Kuusi viimeistä numeroa ovat tuotteen tunnistenumero: Tämä merkki koskee vain sähköisillä toiminnoilla varustettuja tuoleja: Tuoli on IP21-hyväksytty, mikä vastaa tippuvesitiivistä, sekä suojaa sormella koskettuja vaarallisia osia vastaan.	

Tuolin etiketit tulisi lukea n. 40 cm etäisyydeltä normaalissa päivänvalossa. Mitä tulee tuolin käyttöä koskeviin etiketteihin, ole hyvä ja tarkista kohta 2.0.

1.5. EU-VAATIMUSTENMUKAISUUS

Tämä tuote on CE-merkitty lääkin-
nällinen laite (luokka I liitteen VIII
mukaisesti) MDR-asetuksen (EU)
2017/745 mukaisesti. Sähkötoimin-
noilla varustetut tuotteet täyttävät
IEC 60601-1 -standardin turvalli-
suusvaatimukset, mukaan lukien IEC
60601-1-2 -standardin EMC-vaati-
mukset.

Kaikki tuotteen pakkaukset ovat
PPWR 2025/40 -asetuksen mukaisia.

Valmistaja, VELA - Vermund Larsen
A/S, Gøteborgvej 8-12, DK-9200
Aalborg SV, Tanska, vastaa tuottees-
ta, pakkauksesta ja niihin liittyvistä
vaatimustenmukaisuusvakuutuksista.

1.5.1. KÄYTTÖTARKOITUS

Laitteen käyttötarkoitus on tukea
käyttäjän istuma-asentoa arkisten
sisätiloissa tapahtuvien askareiden
aikana, mukaan lukien työtehtävissä.

- :: Tuolia ei ole rakennettu seisomista varten
- :: Pyöräjarrun tulee olla aktivoituna aina tuolille istahtaessa tai noustessa ylös

Kaikki tämän tuolin variantit on testattu ja hyväksytty vastaamaan 160 kg enimmäiskuormitusta. Tuolille on asetettu suositeltu painoraja optimaalisen käytön varmistamiseksi. Painoraja on 50–130 kg kaasupatruunalla ja 50–145 kg sähköisellä korkeudensäädöllä. **Huom:** Henkilöitä, jotka käyttävät tuolia valjaiden kanssa, tulee aina valvoa valjaiden ollessa käytössä.

1.5.2. KULJETUS

Käytä kuljetuksessa tuolijarrua - kuljetitpa tuolia sitten autolla, lentokoneella tai muulla kuljetusvälineellä. Tuolia ei tule kuljettaa matkustajan paikalla tai käyttää sellaisena.

Tuoli on suunniteltu kuljetettavaksi seuraavien ympäristöolosuhteiden alaisuudessa:

Lämpötila: - 20°C - 60°C
Kosteus: 15-95 %

Anna tuolin seistä 24 tuntia ennen käyttöä, jos tuoli on varastoitu alle - 10°C.

1.6. TAKUU

VELA myöntää valitusoikeuden sovellettavan lain nojalla siinä maassa, josta tuoli hankitaan. Valitusoikeus

koskee vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita sekä ammattilaisten suorittamia räätälöintitoimenpiteitä. Huom: edellä mainittua sovelletaan, jos yksinoikeussopimus on tehty suoraan VELA:n kanssa!

VELA ei vastaa tuotteelle tai käyttäjälle aiheutuneista vahingoista, jos vahingot aiheutuvat seuraavista syistä:

- :: Kuljetus
- :: Väärinkäyttö
- :: Tavanomainen kuluminen
- :: Vääränlainen käyttö
- :: Varaosien ja tarvikkeiden käyttö, jotka eivät ole alkuperäisiä VELA-tuotteita
- :: Valtuuttamattomien huoltoteknikoiden tekemät säädöt

1.7. TUOLIN PURKU PAKKAUKSESTA

Tuoli toimitetaan ympäristöystävällisessä ja kierrätettävässä pakkauksessa.

Jos havaitset tuolissa vikoja tai kuljetusvaurioita, ole hyvä ja ota välittömästi yhteyttä VELA-toimittajaasi. Tällaisissa tapauksissa tuolia ei tule käyttää tai yrittää korjata itse.

Toimituksessa vastaanotat:

- :: VELA-tuoli

:: Käyttöopas

:: Laturi (vain sähköisillä toiminnoilla varustetuille tuoleille)

Huom: tarkista kohta 2.0.1 asianmukaisen selkänojan kiinnityksen varmistamiseksi.

1.8. YLLÄPITO

Suosittelimme tuolin vuositarkastusta viallisten tai kuluneiden osien tunnistamiseksi. Kaikki irrotettavat osat on kiristettävä säännöllisesti. Erilaisia oppaita löydät osoitteesta www.vela.eu.

1.8.1. PYÖRÄT

Suosittelimme, että tarkistat pyörät säännöllisesti ja poistat jäljelle jääneet kiertet, jne. Tietyt lattiatyypit keräävät likaa pyöräreiteille. Puhdista siksi pyöräreitit tarpeen mukaan.

1.8.2. RUNKO

Puhdista haalealla vedellä ja lisää tarvittaessa pH-neutraalia pesuainetta.

1.8.3. PEHMUSTE

Kangas: Puhdista kemiallisella puhdistuksella huonekaluille tarkoitetuilla puhdistusaineilla tai vedellä kuivaksi käännettyä kangasta hyödyntäen.

Synteettinen kangas tai nahka:

Puhdista vedellä tai miedolla saippualla kuivaksi käännettyä kangasta hyödyntäen.

Nahka: Puhdista imuroimalla pehmeällä harjalla. Vältä pesuaineiden käyttöä.

Huom: Osoitteesta www.vela.eu löydät puhdistusohjeet kaikille vakioverhoilutyypeillemme.

1.8.4. KIERRÄTYSOPAS

Jos et enää tarvitse VELA-tuoliasi, toinen henkilö voi käyttää sitä tekni-
kon suorittaman huollon jälkeen. Tuolin elinajanodote on viisi vuotta säännöllisessä, asianmukaisessa käytössä. Suosittelemme, että VELA, VELA-toimittaja tai koulutettu ammattilainen suorittaa vuosittaisen tarkastuksen kuluneiden osien tunnistamiseksi.

1.9. KIERRÄTYS JA HÄVITYS

Tämä tuote sisältää kierrätettäviä materiaaleja. Tuote on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti, ei yhdessä talousjätteen kanssa. Asianmukainen hävittäminen ja kierrätys auttavat ehkäisemään ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia.

Huom: Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niiden akut sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka saattavat olla haitallisia ihmisen terveydelle ja ympäristölle, jos jätteitä ei käsitellä oikein.


Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja akut on merkitty alla olevalla ikonilla. Tämä symboloi sitä, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai akkuja tule hävittää yhdessä lajittelemattoman kotitalousjätteen kanssa, vaan ne on kerättävä erikseen.



On tärkeää palauttaa käytetyt akut vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Näin autat varmistamaan, että akut kierrätetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, eivätkä akut pääse aiheuttamaan tarpeetonta haittaa ympäristölle.


2.0. KÄYTTÖOHJEET

Kaasujousen tai sähköisen toimilaitteen saa vaihtaa vain jälleenmyyjän huolto / tukitiimi tai ammattitaitoinen henkilö.

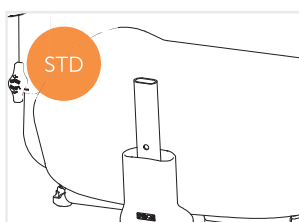


2.0.1. SELKÄNOJAN KINNITTÄMINEN*

Laske selkänoja aukkoon. Kiinnitä selkänoja kahvalla tai mukana toimitetulla työkalulla ja pultilla. Muista kiristää hyvin.

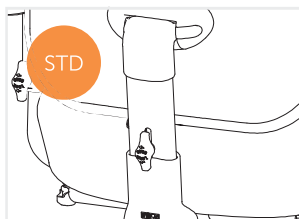

2.0.2. KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN (SÄHKÖINEN)


Voit säätää korkeutta joko oikean tai vasemman käsinojan alapuolelta. VELA Tango El on saatavana myös versiona, jossa korkeutta säädetään käsiohjaimen avulla (jos avustajat säätävät korkeutta). **Huomaa:** Korkeuden säätötoimintoa saa käyttää yhtäjaksoisesti vain yhden minuutin ajan. Tämän jälkeen olisi hyvä odottaa yhdeksän minuutin ajan.

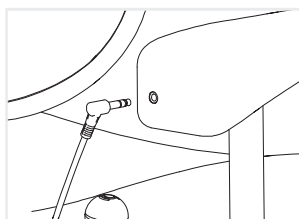

2.0.3. KORKEUDENSÄÄTÖPAIKAN VAIHTAMINEN*

Poista pistoke käsinojan takaa ja aseta se vastakkaiseen käsinojaan tai käsiruudun pohjaan.

Huomautus: Korkeusfunktioita saa käyttää jatkuvasti vain yhden minuutin ajan, jonka jälkeen on yhdeksän minuutin tauko.




Huomio: selkänojan ja istuimen kulman säätäminen tulee tehdä niin, että jalat ovat lattialla.



2.0.4. KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN (KÄSIKÄYTTÖ)


Säädä korkeutta vetämällä oikealla puolella olevaa etummaista kahvaa ylöspäin.

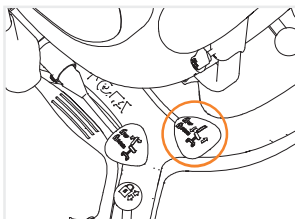

2.0.5. ISTUINKULMAN SÄÄTÄMINEN*


Voit säätää istuimen kallistusta vetämällä oikealla puolella keskimmäisenä olevaa vipua ylöspäin.

Huomaa: Varo sormien ja käsien puristumista, kun säädät istuinkulmaa!

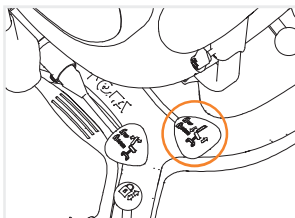

2.0.6. ISTUIMEN KALLISTUKSEN SÄÄTÖ

Koko istuinyksikkö liikkuu (istuin ja selkänoja yhdessä) nostamalla keskikahvaa oikealla puolella.


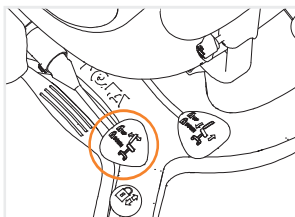


2.0.7. SELKÄKULMAN SÄÄTÄMINEN

Voit säätää selkänojan kallistusta vetämällä oikealla puolella takimmaisena olevaa vipua ylöspäin.

Käytä kahvaa vain, kun joku istuu tuolissa – selkänoja kallistuu eteenpäin.


** Riippuu mallista*

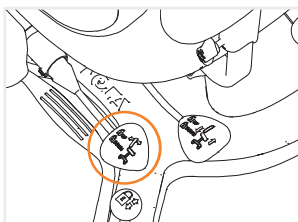

2.0.8. ISTUINSYVYYDEN SÄÄTÄMINEN

Säädä vetämällä oikealla puolella olevaa takaista kahvaa ylöspäin (selkänojan kulma). Säädä istuinsyvyys käyttäjän mukaan.


Käytä kahvaa vain, kun joku istuu tuolissa, koska selkänoja kallistuu eteenpäin.

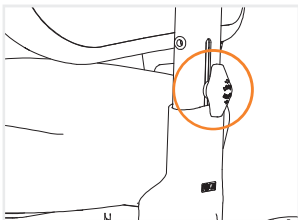

2.0.9. SELKÄNOJAN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN*

Vapauta takana oleva kahva. Säädä selkänojan korkeutta. Kiristä kahva lopuksi kunnolla.


Tietyissä malleissa tämä toiminto voidaan suorittaa vain työkaluja hyödyntäen.

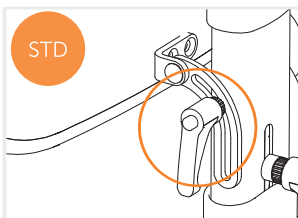

2.0.10. SELKÄNOJAN PULTTI*



Voit kallistaa selkänojaa säätämällä selkänojan takana olevaa pulttia.

Tietyissä malleissa tämä toiminto voidaan suorittaa vain työkaluja hyödyntäen.

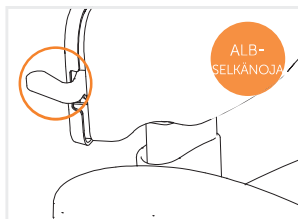

2.0.11. LANNERANGAN TUEN SÄÄTÄMINEN (ALB-SELKÄNOJA)*


Jos haluat säätää selkänojaa niin, että se tukee tehokkaasti alaselkää, vedä selkänojan oikealla puolella olevaa kahvaa ylöspäin. Selkänojan asento muuttuu käyttäjän alaselän asennon mukaisesti. Lukitse selkänoja haluamaasi asentoon vapauttamalla kahva.

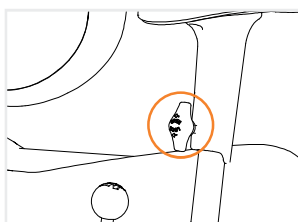

2.0.12. KÄSINOJAN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN*

Voit säätää käsinojan korkeutta löysäämällä käsinojan pystyvarressa olevaa sormiruuviä ja asettamalla käsinojan haluamallesi korkeudelle. Kun olet valmis, kiristä ruuvi uudelleen paikoilleen.


Tietyissä malleissa tämä toiminto voidaan suorittaa vain työkaluja hyödyntäen.

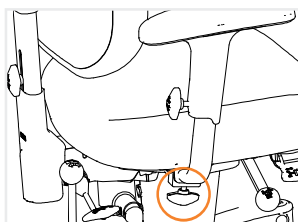

2.0.13. KÄSINOJAN LEVEYDEN SÄÄTÄMINEN*

Voit säätää käsinojan leveyttä löysäämällä istuimen tukitangossa istuimen alapuolella olevaa sormiruuviä ja vetämällä sitten käsinojaa ulospäin. Kun olet valmis, kiristä sormiruuvi uudelleen paikoilleen.


Tietyissä malleissa tämä toiminto voidaan suorittaa vain työkaluja hyödyntäen.

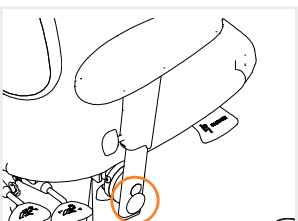

2.0.14. LASKETTAVA KÄSINOJA*

Voit laskea käsinojan alas painamalla käsinojan sivussa olevaa painiketta ja työntämällä käsinojaa taakse- ja alaspäin.


Huomaa: Käsinoja on lukittuna paikoilleen vain, kun se on nostettuna ylös. Käsinojan voi laskea alas vain, jos käsinojen leveys sen sallii.

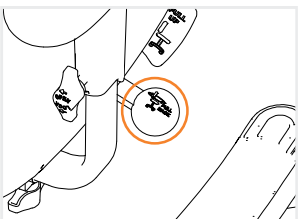

2.0.15. ISTUIMEN ROTAATIO*

Voit kiertää istuinta työntämällä vasemmalla puolella olevaa etummaista kahvaa taaksepäin. Voit kiertää istuinta ja lukita sen seuraaviin asentoihin: 90° vasemmalle ja 90° oikealle.


** Riippuu mallista*

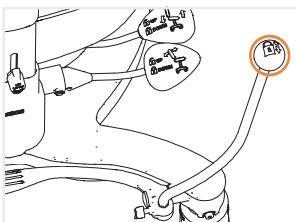

2.0.16. KÄSIJARRU

Aktivoi käsijarru siirtämällä tuolin sivussa olevaa kahvaa eteenpäin. Tuolin lukitus aukeaa, kun siirrät kahvan takaisin pystyasentoon.


Huomio: tutustu kappaleeseen 2.0.18. "Jarrukulman asetus" säätääksesi jarrun asennon ja tuolin etäisyyden.

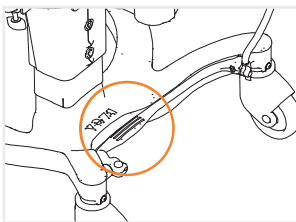

2.0.17. JARRUPOLJIN


Pääset käsiksi jarruun tuolin jokaiselta puolelta. Aktivoi jarru painamalla poljinta jalalla osoitetuilta alueilta.

Aseta jalka jarrupolkimen alle ja työnnä poljinta ylöspäin jarrun vapauttamiseksi.

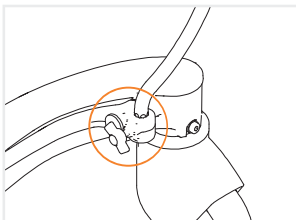


2.0.18. JARRUKULMAN ASETUS*

Löysää sormiruuvi ja irrota jarrutanko pidikkeestä. Aseta jarrutanko haluamaasi sivuun ja kulmaan. Muista kiristää sormiruuvi uudelleen. **Huomio:** jarru voidaan asettaa 30° välein. Jarrutankoa voidaan siirtää eteenpäin/taaksepäin tai lähemmäksi/kauemmaksi istuimesta tarpeen mukaan. Jarrun siirto vastakkaiselle puolelle on myös mahdollista.

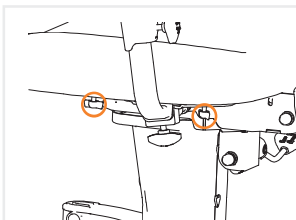

2.0.19. ISTUIMEN VAIHTO

Istuin voidaan vaihtaa poistamalla neljä peukaloruuvia, jotka sijaitsevat istuimen alapuolella kussakin kulmassa.



2.0.20. LATAAMINEN (SÄHKÖINEN)

Lataa joka päivä. Vedä pistoke irti käsinojan takana olevasta pistorasiasta ja laita se akkulaturin latausliitäntään. Sen jälkeen akkulaturi kytketään pistorasiaan. Kun tuolin akkua ladataan, laturin LED-valo palaa keltaisena. Kun tuolin akku on täynnä, LED-valo muuttuu vihreäksi.

Huomaa: Tuolia ei saa käyttää latauksen aikana.



2.0.21. KULMIKAS SÄÄTÖPAINIKE (SÄHKÖINEN)*

Kulmikas säätöpainike asennetaan joko oikean tai vasemman käsinojan alle käyttäjän tarpeiden mukaisesti.

Huomaa: VELA Tango EL on saatavilla myös kauko-ohjattavalla korkeuden säädöllä (jos avustajat säätävät korkeutta).



2.0.22. KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN - KÄSIOHJAIN (SÄHKÖINEN)

Tuolin toimintoja voi ohjata käsiohjaimen painikkeiden avulla. VELA-käsiohjaimilla voi käyttää yhtä tai useampaa toimintoa. **Huomaa:** Voit käyttää toimintoja vasta, kun käsiohjain on kytketty tuoliin. Korkeuden säätötoimintoa saa käyttää yhtäjaksoisesti vain yhden minuutin ajan. Tämän jälkeen olisi hyvä odottaa yhdeksän minuutin ajan.




2.0.23. SÄHKÖINEN JARRU (SÄHKÖINEN)*

Jos tuolissa on sähköinen jarru, voit laittaa jarrun päälle ja pois päältä kauko-ohjaimen tai kulmikkaan säätöpainikkeen avulla. Jarru kannattaa aina pitää joko täysin päällä tai täysin pois päältä.


Huomaa: Toimintoa voi ohjata vain käsinojan alla olevan säätimen, kauko-ohjaimen tai kulmikkaan säätöpainikkeen avulla.

* Riippuu mallista

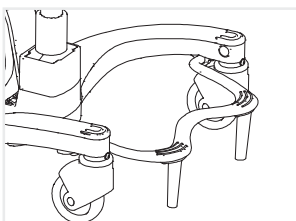


2.0.24. TAITTUVA JALKAKAARI*

Vakauttavaa jalkakaarta voi käyttää astinlevynä, kun käyttäjä siirtyy tuoliin ja pois tuolista.

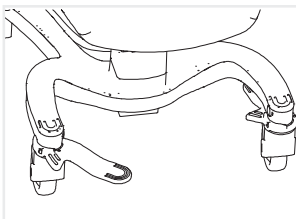


2.0.25. SIVULLE ASENNETTAVA PYÖRIVÄ JALKATUKI*

Asennettu etuoikean ja/tai etuvasen tuolinjalan alapuolelle. Jalkatukea voidaan kääntää sisään/ulos, ja se tarjoaa jalalle tukea tarpeen mukaan. Kun jalkatuki on paikoillaan, se työntyy tuolin rungon alle. Jalkatuessa on pyörimispysäytin sekä sisä- että ulkoasunnoissa.

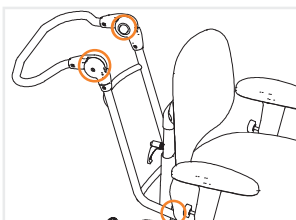


2.0.26. TYÖNTÖKAHVA*

Työntökahvan avulla tuolin käyttäjää voi siirtää helposti paikasta toiseen. Voit asentaa työntökahvan istuimen alla oleviin kiinnikkeisiin kahdella sormiruvilla. Voit säätää syvyyttä samasta kohdasta. Jos haluat säätää korkeutta, paina kahvan sivuilla olevia kahta painiketta ja aseta kahva haluamallesi korkeudelle.

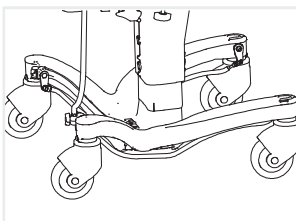

2.0.27. 4-PYÖRÄINEN JARRU*

Aktivoidaan käsi- tai jalkajarrulla kaikissa tuoleissa, pois lukien sähköjarrulla varustellut tuolit, joissa jarru aktivoidaan käsilaatikolla tai kytkimillä. Kaikissa pyörissä on 4-pyöräinen jarru, mikä takaa vakaan istuimen epätasaisilla/vinoilla pinnoilla. **Huomio:** sähköisessä versiossa on suositeltavaa aktivoida tai deaktivoida jarru kauttaaltaan ominaisuuden ollessa käytössä.



2.0.28. TARVIKKEET

Tämä tuoli on saatavana tarvikevalikoiman kera.
Löydät tarvikelistan osoitteesta www.vela.eu

Huomio: Laturi sisältyy tilaukseen lisävarusteena, kun ostat
VELA -tuolin sähkötoiminnoilla.

** Riippuu mallista*



OID 07.2021

701.808-jul26 © Vermund Larsen A/S