



## Bima Basic



### Kohderyhmä, mallit ja ominaisuudet

Mukavuutta parantava istuintyyny käyttäjille, jotka istuvat lyhyehköjä aikoja pyörätuolissa esimerkiksi kuljetuksen aikana. Käyttäjä voi itsenäisesti vaihtaa asentoa, eikä erityisiä istumisongelmia ole.

Tarkoitettu käytettäväksi markkinoilla yleisesti saatavilla olevissa pyörätuoleissa kiinteä- ja riippumallisissa istuimissa. Kuperaa pohjaa käytetään pyörätuoleissa, joissa on riippumallinen istuin, jotta istuinpinnasta saadaan tasainen. Tasaista pohjaa käytetään, kun pyörätuolissa on tiiviimpi ja vakaampi istuin, jota ei tarvitse kompensoida tasauksella.



Istuintyyny on lääkinällinen laite. CE-merkitty MDR (EU) 2017/745 - standardin mukaisesti.

Eudamed-rekisterinumero/SRN: SE-MF-000001678.

ISO-koodi: 181006

Tyynyn paino: 1,4 kg (45 x 43 / 46 x 7 cm)

UDI-DI: Tyynyssä on EAN-13-viivakoodimerkintä 73 400473 AAAA K:n mukaisesti.


Kahden vuoden takuu materiaalin ja valmistusvirheiden osalta.

Kehittänyt ja valmistanut BIMA PLASTTEKNIK AB Ruotsissa. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Respectan asiakaspalveluun puhelimitse numeroon 0207 649 748 tai sähköpostitse osoitteeseen myynti@respecta.fi.



### Käsittely

Tarkista, että pakkaus on kokonainen ja ehjä.

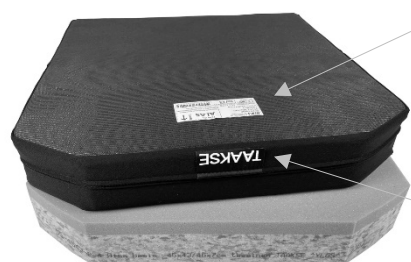

Poista muovipussi ja katso valkoinen etiketti tyynyn alapuolella. Tämä puoli on alapuoli, ja nuoli osoittaa tyynyn taustapuolen.

Musta etiketti, jossa on keltainen teksti (TAAKSE), osoittaa tyynyn taustapuolen.

Uritetun liukumattoman pinnan on oltava alaspäin.



### Puhdistus ja hoito

Tyyny ei vaadi säätöä tai huoltoa. Istuintyyny vaatii ainoastaan puhdistuksen, jotta se on hygieeninen.

Tyyny puhdistetaan pyyhkimällä se pintadesinfiointiaineella, jonka jälkeen se huuhdellaan haalealla vedellä ja ilmakuivataan. Vaihtoehtoisesti tyyny voidaan puhdistaa höyryllä. Toistuvassa

uudelleenkäsittelyssä klooria ja fenoleja sisältäviä pesuaineita tulisi välttää, koska liian suuri annos (yli 1 %) voi vahingoittaa päällistä. Ainoastaan päällinen pestään pyykinpesukoneessa 60 °C:ssa vetoketju suljettuna. Käytä linkousta ja kuivaus kuivausrummussa tai kuivauskaapissa. Tyyny säilytetään kuivassa, mieluiten huoneenlämpöisessä tilassa. Älä purista tai taita tyynyä.



### Laatu

Varmistetaan, että tyyny toimii oikein ja turvallisesti suunnitellun käyttöikänsä ajan (5 vuotta). Tarkista, että tyynyalustan pinnassa ei ole halkeamia tai painumia. Päällisen tulee olla ehjä.

Kuopat/painumat istuinkynhymyn alla ovat merkki siitä, että tyyny on käytetty loppuun ja se on vaihdettava. Käyttöikä voi vaihdella käytön ja hoidon mukaan.



### Lisäpäällinen

Tilataksesi lisäpäällisen ilmoita CV + tuotenumero, esim. CV05-4043-K-4.



## Kierrätys

Tyyny ja päällinen lajitellaan palavaksi jätteeksi, ja ne menevät energiakäyttöön.



## Varotoimet

1. Tyyny on tarkoitettu käytettäväksi pyörätuoleissa.
2. Tyynyn koon on oltava pyörätuolin istuimeen sopiva.
3. Kun tyynyä ei käytetä, se on säilytettävä kuivassa paikassa, mieluiten huoneenlämmössä.
4. Vältä tyynyn puristumista tai taittumista säilytyksen aikana.
5. Älä käytä tyynyä auton istuimella, sillä äkillisessä jarrutuksessa on vaarana, että tyyny liukuu pois paikaltaan.
6. Istuintyyny täyttää asetetut palovaatimukset, mutta tuli, palava savuke tai muut syttymislähteet voivat vaurioittaa sitä.
7. Vältä altistamasta tyynyä sateelle ja kosteudelle. Myös terävät esineet ja voimakkaat kemikaalit voivat vaurioittaa tyynyä.
8. Istuintyynyyn voidaan tehdä normaalisti pienehköjä muutoksia, kuten pyöristää kulmia tai säätää sitä jalkojen pituuden mukaan, ilman, että muutokset heikentävät tyynyn ominaisuuksia. Muutokset on kuitenkin aina dokumentoitava.
9. Puutteet merkitään johtamisjärjestelmässämme olevaan poikkeamaraporttiin, jotta voidaan ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin. Ilmoita kaikista tuotteiden käyttöön liittyvistä onnettomuuksista ja vaaratilanteista jakelijalle. Vakavista onnettomuuksista ja vaaratilanteista on myös ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle.



## Tuotenumero, mitat ja käyttäjän enimmäispaino

| Istuintyyyny Basic |                 | 05- Koko aikuiselle                                                                                                   |               |               | -P = Tasainen pohja |               |               | -K = Kupera pohja |              |                  |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| (cm)               | Istuimen syvyys | Sd/ Sd <sup>tot</sup> , jossa Sd = istuimen syvyys selkänojan putkiin ja Sd <sup>tot</sup> = istuimen syvyys keskeltä |               |               |                     |               |               |                   | Korkeus (cm) | Maks. paino (kg) |
| Leveys             | 35/38           | 38/41                                                                                                                 | 40/43         | 43/46         | 45/48               | 47/50         | 50/53         | 55/58             |              |                  |
| 35                 | 05-3535-P-4FI   | 05-3538-P-4FI                                                                                                         | 05-3540-P-4FI | 05-3543-P-4FI |                     |               |               |                   | 7            | 125              |
| 37,5               | 05-3735-P-4FI   | 05-3738-P-4FI                                                                                                         | 05-3740-P-4FI | 05-3743-P-4FI | 05-3745-P-4FI       | 05-3747-P-4FI | 05-3750-P-4FI |                   | 7            | 125              |
| 40                 | 05-4035-P-4FI   | 05-4038-P-4FI                                                                                                         | 05-4040-P-4FI | 05-4043-P-4FI | 05-4045-P-4FI       | 05-4047-P-4FI | 05-4050-P-4FI |                   | 7            | 125              |
| 42,5               |                 | 05-4238-P-4FI                                                                                                         | 05-4240-P-4FI | 05-4243-P-4FI | 05-4245-P-4FI       | 05-4247-P-4FI | 05-4250-P-4FI |                   | 7            | 125              |
| 45                 |                 | 05-4538-P-4FI                                                                                                         | 05-4540-P-4FI | 05-4543-P-4FI | 05-4545-P-4FI       | 05-4547-P-4FI | 05-4550-P-4FI |                   | 7            | 125              |
| 47,5               |                 | 05-4738-P-4FI                                                                                                         | 05-4740-P-4FI | 05-4743-P-4FI | 05-4745-P-4FI       | 05-4747-P-4FI | 05-4750-P-4FI |                   | 7            | 125              |
| 50                 |                 | 05-5038-P-4FI                                                                                                         | 05-5040-P-4FI | 05-5043-P-4FI | 05-5045-P-4FI       | 05-5047-P-4FI | 05-5050-P-4FI |                   | 7            | 125              |
| 52,5               |                 |                                                                                                                       | 05-5240-P-4FI | 05-5243-P-4FI | 05-5345-P-4FI       | 05-5247-P-4FI | 05-5250-P-4FI |                   | 7            | 150              |
| 55                 |                 |                                                                                                                       | 05-5540-P-4FI | 05-5543-P-4FI | 05-5545-P-4FI       | 05-5547-P-4FI | 05-5550-P-4FI | 05-5555-P-4FI     | 7            | 150              |
| 57,5               |                 |                                                                                                                       | 05-5740-P-4FI | 05-5743-P-4FI | 05-5745-P-4FI       | 05-5747-P-4FI | 05-5750-P-4FI | 05-5755-P-4FI     | 7            | 150              |
| 60                 |                 |                                                                                                                       |               |               | 05-6045-P-4FI       | 05-6047-P-4FI | 05-6050-P-4FI | 05-6055-P-4FI     | 7            | 150              |
| 35                 | 05-3535-K-4FI   | 05-3538-K-4FI                                                                                                         | 05-3540-K-4FI | 05-3543-K-4FI |                     |               |               |                   | 7            | 125              |
| 37,5               | 05-3735-K-4FI   | 05-3738-K-4FI                                                                                                         | 05-3740-K-4FI | 05-3743-K-4FI | 05-3745-K-4FI       | 05-3747-K-4FI | 05-3750-K-4FI |                   | 7            | 125              |
| 40                 | 05-4035-K-4FI   | 05-4038-K-4FI                                                                                                         | 05-4040-K-4FI | 05-4043-K-4FI | 05-4045-K-4FI       | 05-4047-K-4FI | 05-4050-K-4FI |                   | 7            | 125              |
| 42,5               |                 | 05-4238-K-4FI                                                                                                         | 05-4240-K-4FI | 05-4243-K-4FI | 05-4245-K-4FI       | 05-4247-K-4FI | 05-4250-K-4FI |                   | 7            | 125              |
| 45                 |                 | 05-4538-K-4FI                                                                                                         | 05-4540-K-4FI | 05-4543-K-4FI | 05-4545-K-4FI       | 05-4547-K-4FI | 05-4550-K-4FI |                   | 7            | 125              |
| 47,5               |                 | 05-4738-K-4FI                                                                                                         | 05-4740-K-4FI | 05-4743-K-4FI | 05-4745-K-4FI       | 05-4747-K-4FI | 05-4750-K-4FI |                   | 7            | 125              |
| 50                 |                 | 05-5038-K-4FI                                                                                                         | 05-5040-K-4FI | 05-5043-K-4FI | 05-5045-K-4FI       | 05-5047-K-4FI | 05-5050-K-4FI |                   | 7            | 125              |
| 52,5               |                 |                                                                                                                       | 05-5240-K-4FI | 05-5243-K-4FI | 05-5345-K-4FI       | 05-5247-K-4FI | 05-5250-K-4FI |                   | 7            | 150              |
| 55                 |                 |                                                                                                                       | 05-5540-K-4FI | 05-5543-K-4FI | 05-5545-K-4FI       | 05-5547-K-4FI | 05-5550-K-4FI | 05-5555-K-4FI     | 7            | 150              |
| 57,5               |                 |                                                                                                                       | 05-5740-K-4FI | 05-5743-K-4FI | 05-5745-K-4FI       | 05-5747-K-4FI | 05-5750-K-4FI | 05-5755-K-4FI     | 7            | 150              |
| 60                 |                 |                                                                                                                       |               |               | 05-6045-K-4FI       | 05-6047-K-4FI | 05-6050-K-4FI | 05-6055-K-4FI     | 7            | 150              |



Päivämäärä 2023-02-01  
ID 100 Painos 02 FI

## Käyttöohje



Tuotenumero, mitat ja käyttäjän enimmäispaino

| Istuintyyny Basic Child |                 |                                                                                                                       | C05- Koko lapsille |                |                | -P = Tasainen pohja |                |                | -K = Kupera pohja |            |  |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|--|
| (cm)                    | Istuimen syvyys | Sd/ Sd <sup>tot</sup> , jossa Sd = istuimen syvyys selkänöjan putkiin ja Sd <sup>tot</sup> = istuimen syvyys keskeltä |                    |                |                |                     |                |                | Korkeus           | Maks.      |  |
| Leveys                  | 22/25           | 25/28                                                                                                                 | 27/30              | 30/33          | 32/35          | 35/38               | 38/41          | 40/43          | (cm)              | paino (kg) |  |
| 20                      | C05-2022-P-4FI  | C05-2025-P-4FI                                                                                                        | C05-2027-P-4FI     |                |                |                     |                |                | 5                 | 50         |  |
| 22                      | C05-2222-P-4FI  | C05-2225-P-4FI                                                                                                        | C05-2227-P-4FI     |                |                |                     |                |                | 5                 | 50         |  |
| 24                      |                 | C05-2425-P-4FI                                                                                                        | C05-2427-P-4FI     | C05-2430-P-4FI |                |                     |                |                | 5                 | 50         |  |
| 26                      |                 | C05-2625-P-4FI                                                                                                        | C05-2627-P-4FI     | C05-2630-P-4FI | C05-2632-P-4FI |                     |                |                | 5                 | 60         |  |
| 28                      |                 | C05-2825-P-4FI                                                                                                        | C05-2827-P-4FI     | C05-2830-P-4FI | C05-2832-P-4FI | C05-2835-P-4FI      |                |                | 5                 | 60         |  |
| 30                      |                 |                                                                                                                       | C05-3027-P-4FI     | C05-3030-P-4FI | C05-3032-P-4FI | C05-3035-P-4FI      | C05-3038-P-4FI |                | 5                 | 70         |  |
| 32                      |                 |                                                                                                                       |                    | C05-3230-P-4FI | C05-3232-P-4FI | C05-3235-P-4FI      | C05-3238-P-4FI | C05-3240-P-4FI | 5                 | 70         |  |
| 35                      |                 |                                                                                                                       |                    |                | C05-3532-P-4FI | C05-3535-P-4FI      | C05-3538-P-4FI | C05-3540-P-4FI | 5                 | 70         |  |
| 20                      | C05-2022-K-4FI  | C05-2025-K-4FI                                                                                                        | C05-2027-K-4FI     |                |                |                     |                |                | 5                 | 50         |  |
| 22                      | C05-2222-K-4FI  | C05-2225-K-4FI                                                                                                        | C05-2227-K-4FI     |                |                |                     |                |                | 5                 | 50         |  |
| 24                      |                 | C05-2425-K-4FI                                                                                                        | C05-2427-K-4FI     | C05-2430-K-4FI |                |                     |                |                | 5                 | 50         |  |
| 26                      |                 | C05-2625-K-4FI                                                                                                        | C05-2627-K-4FI     | C05-2630-K-4FI | C05-2632-K-4FI |                     |                |                | 5                 | 60         |  |
| 28                      |                 | C05-2825-K-4FI                                                                                                        | C05-2827-K-4FI     | C05-2830-K-4FI | C05-2832-K-4FI | C05-2835-K-4FI      |                |                | 5                 | 60         |  |
| 30                      |                 |                                                                                                                       | C05-3027-K-4FI     | C05-3030-K-4FI | C05-3032-K-4FI | C05-3035-K-4FI      | C05-3038-K-4FI |                | 5                 | 70         |  |
| 32                      |                 |                                                                                                                       |                    | C05-3230-K-4FI | C05-3232-K-4FI | C05-3235-K-4FI      | C05-3238-K-4FI | C05-3240-K-4FI | 5                 | 70         |  |
| 35                      |                 |                                                                                                                       |                    |                | C05-3532-K-4FI | C05-3535-K-4FI      | C05-3538-K-4FI | C05-3540-K-4FI | 5                 | 70         |  |