



VELA Medical

Käyttöohje nro 106062

Item no.: Model

- 70030 VELA X-Ray Chair
- 70031 VELA 'Turn+' Thorax Chair
- 70032 VELA Mammography Chair
- 70033 VELA 'Basic+' Ophthalmology Chair
- 70034 VELA 'Move+' Ophthalmology Chair
- 70035 VELA 'Medium' Exercise Chair
- 70036 VELA 'Large' Exercise Chair
- 70037 VELA 'Basic' Surgeon's chair
- 70038 VELA 'Advance' Phlebotomy chair
- 70041 VELA 'Support+' Surgeon's chair



ISO 9001
ISO 14001

Tuolin muotoilu vaihtelee mallista

1.0. JOHDANTO	3
1.1. VAROITUKSET	4
1.2. ONGELMIEN KARTOITUS	5
1.3. VELA TANGO SÄHKÖISELLÄ KORKEUDEN SÄÄDÖLLÄ	6
1.3.1. Virransyöttö	6
1.3.2. Päästö	6
1.3.3. Ylijännitesuoja	6
1.4. TUOLISSA KÄYTETTY ETIKETIT	7
1.5. TURVALLISUUS	7
1.5.1. Käyttötarkoitus	7
1.5.2. Kuljetus	8
1.6. TAKUU	8
1.7. TUOLIN PURKU PAKKAUKSESTA	8
1.8. YLLÄPITO	9
1.8.1. Pyörät	9
1.8.2. Runko	9
1.8.3. Pehmuste	9
1.9. KIERRÄTYS JA HÄVITYS	9
2.0. ASENTAMINEN	10
2.0.1. Selkänojan kiinnittäminen*	10
2.0.2. Korkeuden säätäminen - käsiohjain (sähköinen)	10
2.0.3. Korkeuden säätäminen (käsikäyttö)	10
2.0.4. Jalkakäyttöinen sähköinen korkeudensäätö (sähköinen)*	11
2.0.5. Istuinkulman säätäminen*	11
2.0.6. Selkäkulman säätäminen	11
2.0.7. Selkänojan korkeuden säätäminen*	11
2.0.8. Selkänojan pultti*	12
2.0.9. Käsinojan korkeuden säätäminen*	12
2.0.10. Käsinojan leveyden säätäminen*	12
2.0.11. Laskettava käsinoja*	12
2.0.12. Lannerangan tuen säätäminen (alb-selkänoja)*	13
2.0.13. 360 ° Jarrupoljin	13
2.0.14. Käsijarru*	13
2.0.15. Taattuva jalkakaari*	13
2.0.16. Istuimen rotaatio*	14
2.0.17. Lataaminen (sähköinen)	14
2.0.18. Sähköinen jarru (sähköinen)*	14
2.0.19. Jarrukulman asetus*	14
2.0.20. Jalkakäyttöinen sähköjarru (sähköinen)*	15
2.0.21. Kirurgin tuolin käsinoja*	15
2.0.22. Kirurgin tuolin käsinojan korkeuden säätäminen*	15
2.0.23. Näytteenoton käsinoja*	15
2.0.24. Työntökahva*	16
2.0.25. Akun ilmaisin (sähköinen)	16
2.0.26. Tarvikkeet	16

1.0. JOHDANTO

ARVOISA ASIAKAS

Kiitos, että valitsit VELA Medicalin potilastuolin! Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä tietoja VELA Medical tuolisi säätämisestä, käytöstä ja kunnossapidosta.

Tärkeää

Tutustu näihin käyttöohjeisiin huolellisesti ja pidä ohjeet tallessa myöhempää käyttöä varten. Pidä käyttöohjeet aina tuolin käyttäjän saatavilla ja toimita ne myös tuolin mahdollisille tuleville käyttäjille. Nämä käyttöohjeet ovat saatavilla myös VELA Medicalin verkkosivustolla osoitteessa www.vela-medical.com. Verkkosivustolla on myös muita hyödyllisiä tietoja tuoleista.

Jos sinulla herää kysyttävää, huomaat virheitä tai haittatapahtumia, ota yhteyttä VELA Medical -jälleenmyyjään.

VELA pidättää oikeuden muuttaa näitä ohjeita.

VELA Medical

Gøteborgvej 8-12
DK-9200 Aalborg SV
Tanska
www.vela-medical.com

1.1. VAROITUKSET



Käyttö	Allergisen reaktion ilmetessä lopeta tuolin käyttö ja konsultoi lääkäriä.
Käyttö	Käytä vain alkuperäisiä VELA Medical varaosia.
Käyttö	Käytä vain tuolin mukana tullutta laturia.
Käyttö	Älä tee muutoksia tuolin mukana tuleviin tarvikkeisiin.
Käyttö	Käytä tuolia sen asianmukaisessa käyttötarkoituksessa.
Käyttö	Ennen istuinkulman tai selkänöjan kulman säätöä, varmista, että käyttäjä istuu tuolissa niin, että jalat lepäävät litteää lattiaa kohden.
Käyttö	Pidä tuolijarru päällä, kun istahdat tai nouset ylös tuolista.
Käyttö	Epävakauden välttämiseksi älä koskaan käytä tuolia pinnoilla, joilla on tasoeroja.
Käyttö	Huolto tulee suorittaa aina ammattilaisen toimesta, pois lukien puhdistus.
Käyttö	Älä koskaan huolla tuolia käytön aikana.
Käyttö	Seuraa aina suositeltuja huolto- ja puhdistusohjeita.
Käyttö	Tuolin toiminnot on tarkoitettu käyttäjälle. Jos käyttäjä istuu tuolilla, tuolin säätö voidaan suorittaa vain käyttäjän tai koulutetun ammattilaisen toimesta.
Käyttö	Älä koskaan käytä sähköistä korkeuden säätöä pidempään kuin kaksi minuuttia kerralla.
Käyttö	Sähkövirheen tai tahattoman korkeuden säädön ilmetessä, paina molempia korkeuden säätöpainikkeita samanaikaisesti 10 sekunnin ajan.
Käyttö	Liikkuvilla osilla on sormien katkeamis- ja puristusvaara. Älä koskaan käytä tuolia jonkun koskettaessa tuolin alaosaa.
Tukehtumisvaara	Pienissä osissa on tukehtumisvaara. Koska pienet osat ovat irrotettavissa, älä koskaan anna lasten leikkiä tuolin kanssa.
Tukehtumisvaara	Jos tuoli on varustettu sähköisellä korkeuden säädöllä, kaapelit ovat esillä. Älä koskaan anna lasten leikkiä kaapeleilla.
Sähkömelu	Muiden kuin vakiokaapeleiden käyttö saattaa lisätä sähkön säteilyä tai vähentää sähkövastetta.
Sähkömelu	Vältä tuolin sijoittamista lähelle laitteita, jotka päästävät sähkömelua.
Sähkömelu	Tuolia voidaan käyttää tässä käyttöoppaassa mainittujen lisävarusteiden kanssa. Muissa tapauksissa sähkömagneettisen säteilyn ilmeneminen on mahdollista.
Sähkömelu	Jos tuoli liikkuu tahattomasti tai ei toimi odotetulla tavalla, etsi tuolille toinen paikka.

1.2. ONGELMIEN KARTOITUS

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Elektroninen korkeuden säätö ei toimi	Pistoketta ei ole kytketty käsilaatikkoon - kytke pistoke Tuolin akussa ei ole virtaa. Lataa akku tuolin mukana toimitetulla laturilla. Sulake on rikki. Katso kohta 1.3.3
Manuaalinen korkeuden säätö ei toimi	Tuolin kuorma on liiallinen tai epätasainen. Kokeile säätää tuolin korkeutta istumatta tuolilla. Jos tämä ei auta, kaasupatruuna on vioittunut ja tulee vaihtaa. Ota yhteyttä VELA Medical-toimittajaasi.
Jarrutoiminto ei toimi	Jarru ei ole aktivoitu. Katso kohta 2.0.13. 2.0.14. tai 2.0.18.
Käsinoja vaikuttaa löysältä	Yksi ruuveista saattaa olla löystynyt. Kiristä ruuvia.
Tuoli rullaa huonosti	Pyörät ovat tukossa. Puhdista pyörät kaapelijäämien tai vastaavien varalta.
Jarruvarsi tai alusta on tiellä, kun liikun tuolissa	Tuolissasi on istuinkierto. Käytä istuinkiertoa suoristaaksesi tuolin. Katso kohta 2.0.12.
Jarrutanko vaikuttaa olevan löysällä	Jarrutankoa pitelevä käsiruuvi saattaa olla löysällä. Kiristä ruuvi. Katso kappale 2.0.19.

Jos yllä olevat eivät ratkaise ongelmaasi, ota yhteyttä VELA Medical-toimittajaasi.

1.3. VELA TANGO SÄHKÖISELLÄ KORKEUDEN SÄÄDÖLLÄ

1.3.1. VIRRANSYÖTTÖ

Jännite: 24Vdc

Sähkövirta: 0.5A

Teho: 12VA

1.3.2. PÄÄSTÖ

Sähköisillä toiminnoilla varusteltu VELA Medical-tuoli on testattu ja täyttää tämähetkiset sähkömagneettista säteilyä koskevat vaatimukset (EMC-vaatimukset). Tuoli on testattu seuraavien vaatimusten mukaisesti:

:: Päästöluokka CISPR 11, Ryhmä 1, Luokka B

Lisätietoa osoitteessa www.vela-medical.com

1.3.3. YLIJÄNNITESUOJA

Tuoliin on asennettu sulake, joka suojaa tuolia ylijännitteeltä. Sulakkeessa on vaihdettava osa, jota koskevat seuraavat vaatimukset:

:: Litteä sulake, tyyppi: ATOF terässulake, nopeasti reagoiva


:: Jännite: 32V

:: Sähkövirta: 10A

:: Max. sähkövirta: 1000A

Sulakkeen vaihdon voi suorittaa vain koulutettu ammattilainen. Turvallisuussyistä rikkoutumisen syy on aina dokumentoitava.

1.4. TUOLISSA KÄYTETYT ETIKETIT

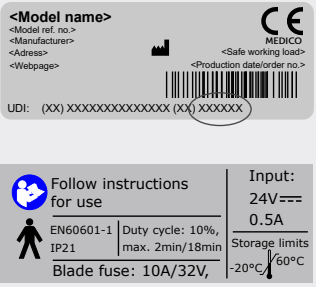Varoitus	Katkeamis- ja puristusvaara: pidä kädet ja sormet poissa liikkuvista osista	
Symboli	Lue "Käyttöopas" ennen käyttöä	
Symboli	Käytetty osi: Tyypin B cf. IEC60601-1 kattaen seuraavat tuolin osat:	 
Merkki	60 x 22,5 mm Kuusi viimeistä numeroa ovat tuotteen tunnistenumero: Tämä merkki koskee vain sähköisillä toiminnoilla varusteltuja tuoleja: Tuoli on IP21-hyväksytty, mikä vastaa tippovesitiivistä, sekä suoja sormella koskettuja vaarallisia osia vastaan.	

Tuolin etiketit tulisi lukea n. 40 cm etäisyydeltä normaalissa päivänvalossa. Mitä tulee tuolin käyttöä koskeviin etiketteihin, ole hyvä ja tarkista kohta 2.0.

1.5. TURVALLISUUS

Tämä tuoli on CE-merkitty ja hyväksytty nimellä "VELA Tango" ja täyttää kaikkien siihen sovellettavien EU:n säädösten vaatimukset. Tuolin on valmistanut VELA Medical, Goeteborgvej 8-12, 9200 Aalborg SV, Tanska.

Sähköisillä toiminnoilla varusteltu VELA Tango täyttää kaikki IEC 60601-1 mukaiset turvallisuusvaatimukset, mukaan lukien IEC60601-1-2 mukaiset EMC-vaatimukset.

1.5.1. KÄYTTÖTARKOITUS

Laitteen käyttötarkoitus on tukea käyttäjän istuma-asentoa arkisten sisätiloissa tapahtuvien askareiden aikana, mukaan lukien työtehtävissä.

- :: Tuolia ei ole rakennettu seisomista varten
- :: Pyöräjarrun tulee olla aktivoituna aina tuolille istahtaessa tai noustessa ylös

Kaikki tämän tuolin variantit on testattu ja hyväksytty vastaamaan 160 kg enimmäiskuormitusta. Tuolille on asetettu suositeltu painoraja optimaalisen käytön varmistamiseksi. Painoraja on 50–130 kg kaasupatruunalla ja 50–145 kg sähköisellä korkeudensäädöllä.

1.5.2. KULJETUS

Käytä kuljetuksessa tuolijarrua - kuljetitpa tuolia sitten autolla, lentokoneella tai muulla kuljetusvälineellä. Tuolia ei tule kuljettaa matkustajan paikalla tai käyttää sellaisena.

Tuoli on suunniteltu kuljetettavaksi seuraavien ympäristöolosuhteiden alaisuudessa:

Lämpötila: - 20°C - 60°C

Kosteus: 15-95 %

Anna tuolin seistä 24 tuntia ennen käyttöä, jos tuoli on varastoitu alle -10°C.

1.6. TAKUU

VELA Medical myöntää valitusoikeuden sovellettavan lain nojalla siinä maassa, josta tuoli hankitaan. Valitusoikeus koskee vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita sekä ammattilaisten suorittamia rätätöitä.

Huom: edellä mainittua sovelletaan, jos yksinoikeussopimus on tehty suoraan VELA Medical kanssa!

VELA Medical ei vastaa tuotteelle tai käyttäjälle aiheutuneista vahingoista, jos vahingot aiheutuvat seuraavista

:: Kuljetus

:: Väärinkäyttö

:: Tavanomainen kuluminen

:: Vääränlainen käyttö

:: Varaosien ja tarvikkeiden käyttö, jotka eivät ole alkuperäisiä VELA Medical-tuotteita

:: Valtuuttamattomien huoltoteknikoiden tekemät säädöt

1.7. TUOLIN PURKU PAKKAUKSESTA

Tuoli toimitetaan ympäristöystävällisessä ja kierrätettävässä pakkauksessa.

Jos havaitset tuolissa vikoja tai kuljetusvaurioita, ole hyvä ja ota välittömästi yhteyttä VELA Medical-toimittajaasi. Tällaisissa tapauksissa tuolia ei tule käyttää tai yrittää korjata itse.

Toimituksessa vastaanotat:

:: VELA Medical-tuoli

:: Käyttöopas

:: Laturi (vain sähköisillä toiminnoilla varustetuille tuoleille)

Huom: tarkista kohta 2.0.1 asianmukaisen selkänöjan kiinnityksen varmistamiseksi.

1.8. YLLÄPITO

Suosittelemme tuolin vuositarkastusta viallisten tai kuluneiden osien tunnistamiseksi. Kaikki irrotettavat osat on kiristettävä säännöllisesti. Erilaisia oppaita löydät osoitteesta www.vela-medical.com.

Tuolin elinajanodote on viisi vuotta säännöllisessä, asianmukaisessa käytössä, kunhan VELA Medical, VELA Medical-toimittaja tai koulutettu ammattilainen suorittaa vuosittaisen tarkastuksen kuluneiden osien tunnistamiseksi.

1.8.1. PYÖRÄT

Suosittelemme, että tarkistat pyörät säännöllisesti ja poistat jäljelle jääneet kierteet, jne.

1.8.2. RUNKO

Puhdista haalealla vedellä ja lisää tarvittaessa pH-neutraalia pesuainetta.

1.8.3. PEHMUSTE

Kangas: Puhdista kemiallisella puhdistuksella huonekaluille tarkoitetuilla puhdistusaineilla tai vedellä kuivaksi käännettyä kangasta hyödyntäen.

Synteettinen kangas tai nahka:

Puhdista vedellä tai miedolla saippualla kuivaksi käännettyä kangasta hyödyntäen.

Lääketieteelliseen tarkoitukseen

käytettävät tekstiilit: Puhdista edellä kuvatulla tavalla. Voit tarvittaessa käyttää myös desinfiointiaineita ja alkoholipohjaista puhdistusainetta. Katso, mitkä erityiset pitoisuudet erityyppiset verhoilut voivat käsitellä, katso www.vela-medical.com

Huom: Osoitteesta www.vela-medical.com löydät puhdistusohjeet kaikille vakioverhoilutyypeillemme.

1.9. KIERRÄTYS JA HÄVITYS

Tämä tuote sisältää kierrätettäviä materiaaleja. Tuote on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti, ei yhdessä talousjätteen kanssa. Asianmukainen hävittäminen ja kierrätys auttavat ehkäisemään ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia.

Huom: Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niiden akut sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka saattavat olla haitallisia ihmisen terveydelle ja ympäristölle, jos jätteitä ei käsitellä oikein.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja akut on merkitty alla olevalla ikonilla. Tämä symboloi sitä, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai akkuja tule hävittää yhdessä laittelemattoman kotitalousjätteen kanssa, vaan ne on kerättävä erikseen.



On tärkeää palauttaa käytetyt akut vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Näin autat varmistamaan, että akut kierrätetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, eivätkä akut pääse aiheuttamaan tarpeetonta haittaa ympäristölle.





2.0. ASENTAMINEN

Vain VELA Medicalin teknikko tai tarvittavan koulutuksen saanut henkilö saa vaihtaa kaasujousen ja sähköisen nostomekanismin.




2.0.1. SELKÄNOJAN KIIINNITTÄMINEN*

Laske selkänoja aukkoon. Kiinnitä selkänoja kahvalla tai mukana toimitetulla työkalulla ja pultilla. Muista kiristää hyvin.

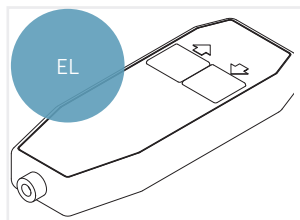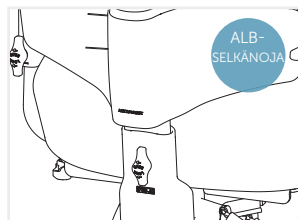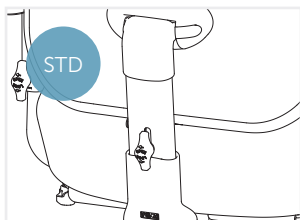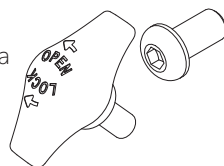

2.0.2. KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN - KÄSIOHJAIN (SÄHKÖINEN)


Tuolin toimintoja voi ohjata käsiohjaimen painikkeiden avulla. VELA Medical-käsiohjaimilla voi käyttää yhtä tai useampaa toimintoa. **Huomaa:** Voit käyttää toimintoja vasta, kun käsiohjain on kytketty tuoliin. Korkeuden säätötoimintoa saa käyttää yhtäjaksoisesti vain yhden minuutin ajan. Tämän jälkeen olisi hyvä odottaa yhdeksän minuutin ajan.

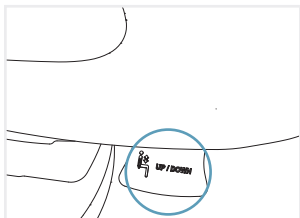

2.0.3. KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN (KÄSIKÄYTTÖ)


Säädä korkeutta vetämällä oikealla puolella olevaa etummaista kahvaa ylöspäin.

Huomio: selkänojan ja istuimen kulman säätäminen tulee tehdä niin, että jalat ovat lattialla.

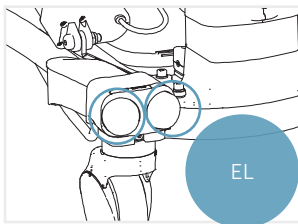

2.0.4. JALKAKÄYTTÖINEN SÄHKÖINEN KORKEUDENSÄÄTÖ (SÄHKÖINEN)*


Aktivoi jalkakäyttöinen sähköinen korkeudensäätö painamalla jalalla toista oikean ratastornin etuosasta löytyvistä kytkimistä. Nosta tuolia painamalla oikeaa kytkintä ja laske tuolia painamalla vasenta kytkintä.

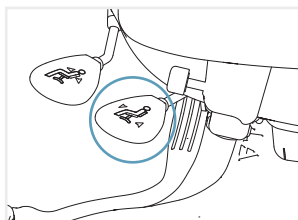

2.0.5. ISTUINKULMAN SÄÄTÄMINEN*

Voit säätää istuimen kallistusta vetämällä oikealla puolella keskimmäisenä olevaa vipua ylöspäin.


Huomio: Varo sormien ja käsien puristumista, kun säädät istuinkulmaa!

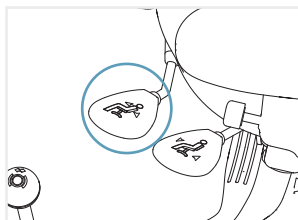

2.0.6. SELKÄKULMAN SÄÄTÄMINEN

Voit säätää selkänojan kallistusta vetämällä oikealla puolella takimmaisena olevaa vipua ylöspäin.

Huomio: Käytä kahvaa vain, kun joku istuu tuolissa – selkänoja kallistuu eteenpäin.

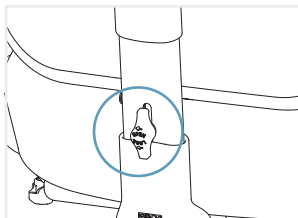


2.0.7. SELKÄNOJAN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN*

Vapauta takana oleva kahva. Säädä selkänojan korkeutta. Kiristä kahva lopuksi kunnolla.

Huomio: Tietyissä malleissa tämä toiminto voidaan suorittaa vain työkaluja hyödyntäen.


** Riippuu mallista*

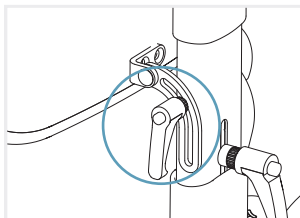

2.0.8. SELKÄNOJAN PULTTI*

Voit kallistaa selkänojaa säätämällä selkänojan takana olevaa pulttia.


Huomio: Tietyissä malleissa tämä toiminto voidaan suorittaa vain työkaluja hyödyntäen.

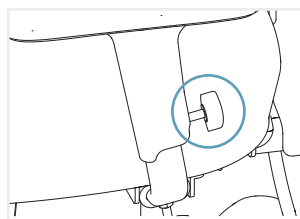

2.0.9. KÄSINOJAN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN*

Voit säätää käsinojan korkeutta löysäämällä käsinojan pystyvarressa olevaa sormiruuvia ja asettamalla käsinojan haluamallesi korkeudelle. Kun olet valmis, kiristä ruuvi uudelleen paikoilleen.


Huomio: Tietyissä malleissa tämä toiminto voidaan suorittaa vain työkaluja hyödyntäen.

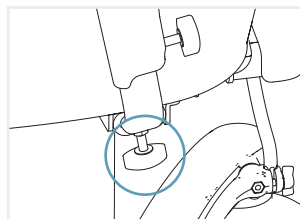

2.0.10. KÄSINOJAN LEVEYDEN SÄÄTÄMINEN*

Voit säätää käsinojan leveyttä löysäämällä istuimen tukitangossa istuimen alapuolella olevaa sormiruuvia ja vetämällä sitten käsinojaa ulospäin. Kun olet valmis, kiristä sormiruuvi uudelleen paikoilleen.


Huomio: Tietyissä malleissa tämä toiminto voidaan suorittaa vain työkaluja hyödyntäen.

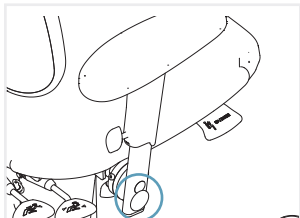

2.0.11. LASKETTAVA KÄSINOJA*


Voit laskea käsinojan alas painamalla käsinojan sivussa olevaa painiketta ja työntämällä käsinojaa taakse- ja alaspäin.

Huomio: Käsinoja on lukittuna paikoilleen vain, kun se on nostettuna ylös. Käsinojan voi laskea alas vain, jos käsinojen leveys sen sallii.

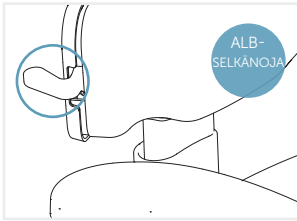


2.0.12. LANNERANGAN TUEN SÄÄTÄMINEN (ALB-SELKÄNOJA)*

Jos haluat säätää selkänöjaa niin, että se tukee tehokkaasti alaselkää, vedä selkänöjan oikealla puolella olevaa kahvaa ylöspäin. Selkänöjan asento muuttuu käyttäjän alaselän asennon mukaisesti. Lukitse selkänöja haluamaasi asentoon vapauttamalla kahva.

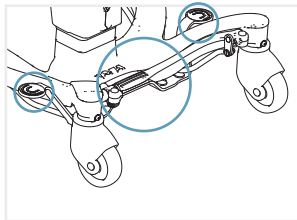


2.0.13. 360 ° JARRUPOLJIN

Pääset käsiksi jarruun tuolin jokaiselta puolelta. Aktivoi jarru painamalla poljinta jalalla osoitetuilta alueilta. Aseta jalka jarrupolkimen alle ja työnnä poljinta ylöspäin jarrun vapauttamiseksi.

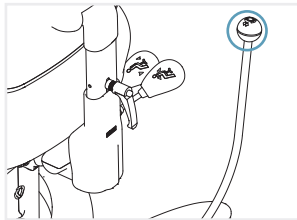


2.0.14. KÄSIJARRU*

Aktivoi käsijarru siirtämällä tuolin sivussa olevaa kahvaa eteenpäin. Tuolin lukitus aukeaa, kun siirrät kahvan takaisin pystyasentoon. Huomio: tutustu kappaleeseen 2.0.19. "Jarrukulman asetus" säätääksesi jarrun asennon ja tuolin etäisyyden.

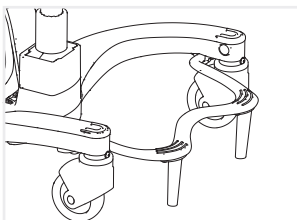


2.0.15. TAITTUVA JALKAKAARI*

Vakauttavaa jalkakaarta voi käyttää astinlevynä, kun käyttäjä siirtyy tuoliin ja pois tuolista.

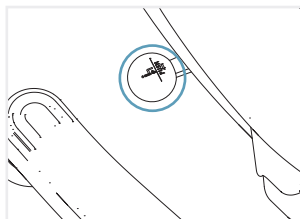


2.0.16. ISTUIMEN ROTAATIO*

Voit kiertää istuinta työntämällä vasemmalla puolella olevaa etummaista kahvaa taaksepäin. Voit kiertää istuinta ja lukita sen seuraaviin asentoihin: 90° vasemmalle ja 90° oikealle.

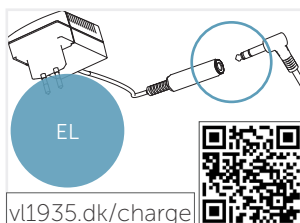


2.0.17. LATAAMINEN (SÄHKÖINEN)

Tuolin akku kannattaa ladata päivittäin. Kytke liitin laturiin. Kun tuolin akkua ladataan, laturin LED-valo palaa keltaisena. Kun tuolin akku on täynnä, LED-valo muuttuu vihreäksi. Huomio: Älä käytä tuolia lataamisen aikana.

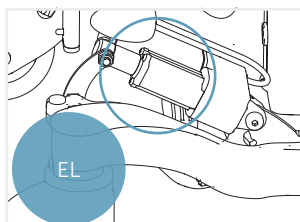


2.0.18. SÄHKÖINEN JARRU (SÄHKÖINEN)*

Jos tuolissa on sähköinen jarru, voit laittaa jarrun päälle ja pois päältä kauko-ohjaimen tai kulmikkaan säätöpainikkeen avulla. Jarru kannattaa aina pitää joko täysin päällä tai täysin pois päältä. Huomio: Toimintoa voi ohjata vain käsinohjauksen alla olevan säätimen, kauko-ohjaimen tai kulmikkaan säätöpainikkeen avulla.

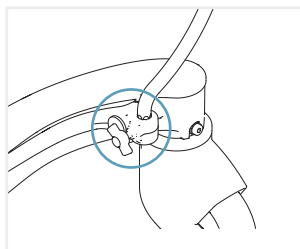


2.0.19. JARRUKULMAN ASETUS*

Löysää sormiruuvi ja irrota jarrutanko pidikkeestä. Aseta jarrutanko haluamaasi sivuun ja kulmaan. Muista kiristää sormiruuvi uudelleen. Huomio: jarru voidaan asettaa 30° välein. Jarrutankoa voidaan siirtää eteenpäin/taaksepäin tai lähemmäksi/kauemmaksi istuimesta tarpeen mukaan. Jarrun siirto vastakkaiselle puolelle on myös mahdollista.

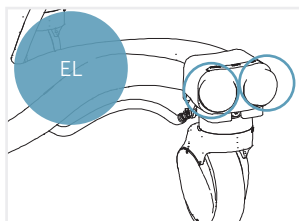


2.0.20. JALKAKÄYTTÖINEN SÄHKÖJARRU (SÄHKÖINEN)*

Aktivoi jalkakäyttöinen sähköjarru painamalla jalalla toista vasemman ratastornin etuosasta löytyvistä kytkimistä. Vapauta jarrut painamalla oikeaa kytkintä ja jarruta painamalla vasenta kytkintä. Suosittelemme, että aktivoit tai poistat jarrun kokonaan käytöstä toimintoa käytettäessä.

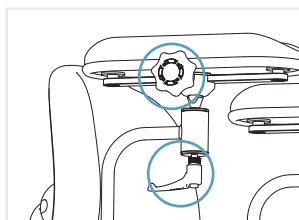


2.0.21. KIRURGIN TUOLIN KÄSINOJA*

Säädä löystämällä käsinojan ruuvia ja muuta kulmaa. Muista kiristää ruuvi uudelleen. Säädä pehmusteita löystämällä käsinojan ruuvia. Säädä pehmuste haluttuun asentoon. Muista kiristää ruuvi uudelleen.

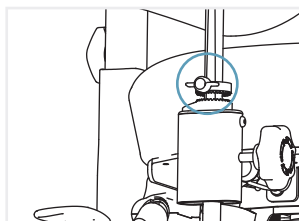

2.0.22. KIRURGIN TUOLIN KÄSINOJAN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN*


Säädä löystämällä käsinojan ruuvia ja muuta käsinojan korkeutta. Muista kiristää ruuvi uudelleen.

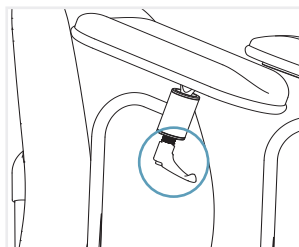

2.0.23. NÄYTTEENOTON KÄSINOJA*


Käsinojaa säädetään löystämällä pehmusteen alla olevaa ruuvia ja muuttamalla käsinojan kulmaa. Muista kiristää ruuvi uudelleen.

* Riippuu mallista

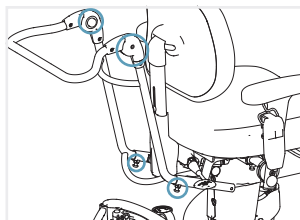

2.0.24. TYÖNTÖKAHVA*

Työntökahvan avulla tuolin käyttäjää voi siirtää helposti paikasta toiseen. Voit asentaa työntökahvan istuimen alla oleviin kiinnikkeisiin kahdella ruuvilla (löytyy mukana tulevasta uudelleensuljettava pussi). Voit säätää syvyyttä samasta kohdasta. Jos haluat säätää korkeutta, paina kahvan sivuilla olevia kahta painiketta ja aseta kahva haluamallesi korkeudelle.

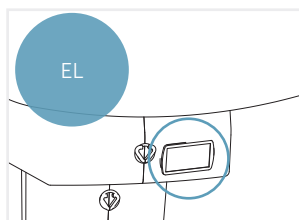

2.0.25. AKUN ILMAISIN (SÄHKÖINEN)

Akun merkkivalo ja painike sijaitsevat tuolin etuosassa istuimen alla.

Yksi painallus osoittaa jäljellä olevan akkukapasiteetin prosentteina (%).

Kaksi painallusta osoittaa jäljellä olevan akun jännitteen.

2.0.26. TARVIKKEET

Tämä tuoli on saatavana tarvikevalikoiman kera.

Löydät tarvikelistan osoitteesta www.vela-medical.com

Huomio: Laturi sisältyy tilaukseen lisävarusteena, kun ostat VELA Medical -tuolin sähkötoiminnoilla.

* Riippuu mallista