

MIGO 2G



Käyttöohjeet

Sisällysluettelo

Esipuhe	39
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	39
Käyttöikä	39
Hävittäminen	39
Tunnuskilpi	39
Uudelleenkäyttö	39
Takuutiedot	39
Tuotteen osat	40
Käyttötarkoitus	41
Indikaatio	41
Toimituksen laajuus	41
Turvallisuusohjeet	41
Auki levittäminen	42
Lisävarusteiden kokoaminen	42
Työntökahvojen korkeuden säätö	42
Jarrujen säätö	42
Jarrutus Pysäköinti	42
Istuminen	43
Kokoontaittaminen Kuljetus Säilytys	43
Puhdistus Huolto	43
Tekniset tiedot	43

Esipuhe

Kiitos, että valitsit Drive DeVilbissin tuotteen.

Et tule pettymään tämän tuotteen muotoiluun, toimivuuteen ja laatuun.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa. Ne sisältävät tärkeitä turvallisuustietoja ja arvokkaita vinkkejä laitteen asianmukaiseen käyttöön ja hoitoon. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Drive DeVilbiss -jälleenmyyjään, joka toimitti tuotteesi.

Nämä käyttöohjeet sisältävät kaikki säätöjä ja käyttöä koskevat tärkeät tiedot. Uusimmat käyttöohjeet ovat saatavilla PDF-tiedostona verkossa tai niitä voi pyytää asiakaspalvelusta.

Näkövammaisille henkilöille voidaan näyttää suurennettuja muotoja. Avustajan on opastettava sokeaa potilasta. Korjaukset ja jotkin säädöt edellyttävät teknistä erityiskoulutusta, ja sen vuoksi lääkinnällisten tarvikkeiden jälleenmyyjän on tehtävä ne.

Vaatumustenmukaisuusvakuutus

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG vakuuttaa, että kuvattu tuote on lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745 mukainen.

Käyttöikä

Yrityksemme olettaa, että tuotteen käyttöikä on viisi vuotta, kunhan tuotetta käytetään tarkoituksenmukaisesti ja kaikkia huolto- ja kunnossapitovaatimuksia noudatetaan.


Tämä käyttöikä voi ylittyä huomattavasti, jos tuotetta käsitellään, korjataan, huolletaan ja käytetään huolellisesti eikä tieteen ja tekniikan jatkokehitykseen perustuvia teknisiä esteitä ilmene käytön aikana.

Käyttöikä voi myös lyhentyä merkittävästi äärimmäisen ja epäasianmukaisen käytön vuoksi. Yrityksemme tekemä käyttöiän määrittäminen ei ole lisätakuu.

Hävittäminen

Jos et enää tarvitse tuotetta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai toimita tuote paikalliseen jäteasemalle.

Tunnuskilpi

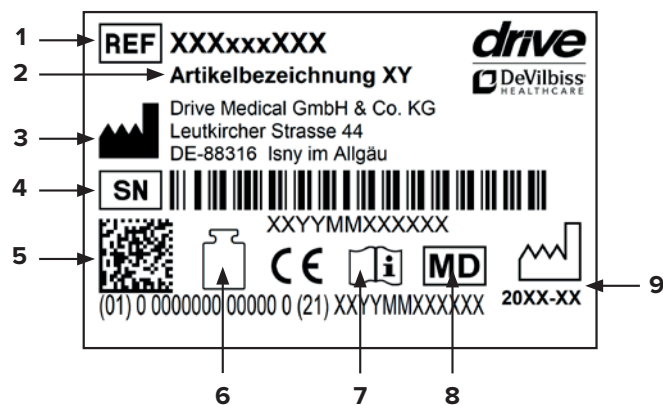

1 Tuotenumero | 2 Tuotenimi | 3 Valmistaja | 4 Sarjanumero | 5 UDI-koodi | 6 Maksimikuormitus | 7 Noudata käyttöohjeita | 8 Lääkinnällinen laite | 9 Tuotantopäivämäärä (vuosi-kuukausi)

Uudelleenkäyttö

Tätä tuotetta voidaan käyttää uudelleen.

Huomaa, että kaikki turvallisen käsittelyn edellyttämät tekniset asiakirjat on annettava myös uudelle käyttäjälle.

Jälleenmyyjän on tarkastettava tuote, puhdistettava se ja saatettava se optimaaliseen kuntoon.

Noudata valmistelussa aina valmistajan ohjeita, jotka ovat saatavilla pyynnöstä.

Lisävarusteita on saatavana erikoismyyjältä tai osoitteesta www.drivedevilbiss.de

Takuutiedot

Toimittamamme tuotteen takuu-aika on 24 kuukautta ostopäivästä. Vialliset osat korvataan maksutta, jos voidaan osoittaa, että kyseessä on materiaali- tai valmistusvirhe.

Kuluvat osat eivät yleensä kuulu takuun piiriin normaalina takuu-aikana, paitsi jos osat on korjattava tai vaihdettava selkeän valmistus- tai materiaalivirheen suorana seurauksena.

Pidätämme oikeuden virheisiin ja muutoksiin teknisten parannusten ja suunnittelun muutosten perusteella.

TAKUUN POISSULKEMINEN

Kulumiselle alttiita osia ovat (muun muassa): pyörät, jarrut ja kahvat



MIGO 2G

- | | | |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| 1. Kahva | 5. Takapyörä | 9. Kepin pidike |
| 2. Jarru | 6. Runko | 10. Istuin |
| 3. Työntökahva | 7. Etupyörä | 11. Tarjotin |
| 4. Työntökahvojen lukitusvipu | 8. Kori | 12. Jarrukaapeli |

Käyttötarkoitus

Kävelytelineillä tuetaan turvallista kävelyä ja mallista riippuen niillä voidaan myös lieventää painetta. Nelipyöräiset kävelytelineet on valmistettu putkimaisista rungoista, joissa on neljä kiinteää pyörää. Nämä kävelytelineet on suunniteltu sellaisiksi, että käyttäjä liikkuu aina rungon tai pyörien välissä. Näissä kävelytelineissä on jarrujärjestelmät, jotka toimivat käsijarruilla. Nämä kävelytelineet voidaan taittaa kokoon kuljetusta varten ja kädensijojen korkeutta voidaan säätää eri korkeuksille.

Indikaatio

INDIKAATIO:

Ulko- ja sisäkäyttöön tarkoitettu kävelyn apuväline, joka kompensoi tai parantaa rajoitettua kävelykykyä. Vakuuteuille osapuolille on toimitettava kävelyä edistäviä apuvälineitä, joiden tarkoituksena on kompensoida tai ainakin parantaa käyttäjän rajoittunutta kävelykykyä (toimintasäteen laajentaminen tai liikkuvuus).

Henkilöt, joilla on rajoituksia käsien/käsivarsien toiminnassa, tarvitsevat erityisiä säätöjä tai muotoiltuja kahvoja tai käsi-/kynnärnoja. Liikkuvat kävelyn apuvälineet eivät välttämättä sovellu henkilöille, joilla on tasapainohäiriöitä; tämä on testattava yksilökohtaisesti. Avustajan on tarvittaessa oltava paikalla. Rollaattoria saa käyttää vain tavanomaisiin, jokapäiväisiin toimintoihin.

KONTRAINDIKAATIOT:

Rollaattori ei sovellu käytettäväksi seuraavissa tapauksissa: havaintohäiriöt, vakava tasapainon menetys, kyvyttömyys istua.

Toimituksen laajuus

1 x	Rollaattori
1 x	Kori
1 x	Tarjotin
1 x	Kepin pidike
1 x	Käyttöohjeet

Turvallisuusohjeet

- Käytä rollaattoria vain kävelyn apuvälineenä!
- Käytä rollaattoria vain tasaisella ja kiinteällä alustalla.
- Rollaattoria ei saa käyttää istuimena ajoneuvoissa, kuten bussissa tai junassa!
- Rollaattorin päällä seisominen tai henkilön tai eläimen kuljettaminen rollaattorin päällä on kielletty.
- Ota huomioon käyttäjän sallittu enimmäispaino. Nämä tiedot löytyvät tämän käyttöohjeen teknisistä tiedoista sekä tunnistekilvestä.
- Käytä tarjotinta vain pienille, kevyille esineille, jotka eivät ole teräviä tai kuumia. Maksimikuormitus: 5,0 kg
- Käytä koria vain esineiden kuljettamiseen äläkä ylikuormita sitä! Maksimikuormitus: 5,0 kg
- Käyttö liukuportaissa ja vastaavissa on nimenomaisesti kielletty!
- Työntökahvat on aina säädettävä liikesuunnan suuntaisesti - kaatumisvaara!
- Älä ripusta mitään esineitä kahvoista – kaatumisvaara!
- Käytä jyrkillä pinnoilla käyttäjarrua (vedä jarruvipua ylöspäin).
- Liiallinen nojaaminen kahvoihin voi aiheuttaa rollaattorin kallistumisen taaksepäin.
- Kun rollaattoria taitetaan tai puretaan, vaatteet ja ruumiinosat voivat jäädä puristuksiin.
- Suojaa rollaattori suoralta auringonvalolta. Tuotteen osat voivat kuumentua ja aiheuttaa ihovammoja, jos niihin kosketaan.
- Varmista ennen jokaista käyttökertaa, että rollaattori on ehjä ja että kaikki säädettävät osat on kiinnitetty asianmukaisesti. Tarkista, että jarrut toimivat oikein!
- Varmista ennen rollaattorin käyttöä, että taittosuoja on lukittu kunnolla.
- Tarkista rollaattorin ruuvit säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa.
- Renkaiden kulumisen voi heikentää jarrutustehoa. Tarkista jarrutuksen vaikutus ja renkaat säännöllisesti.
- Rollaattoria EI saa kantaa istuimesta, irrotettavista osista tai jarruvaijereista.
- Jokaisesta tuotteeseen liittyvästä vakavasta vaaratilanteesta on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.

Auki levittäminen



Aseta rollaattori pyörilleen. Paina eturunkoa eteenpäin vetämällä kahvaa vinottain alaspäin ja taaksepäin, kunnes rollaattori seisoo neljällä pyörällä.

Paina sen jälkeen istuinta alas, kunnes se naksauttaa keskiputkeen (**kuva 1**).

Lisävarusteiden kokoaminen





Ripusta kori pieniin koukuihin edessä istuimen alla ja aseta tarjotin siten, että pienet kiinnitystapit kohdistuvat istuinosassa oleviin pieniin reikiin (**kuva 2**).

Työntökahvojen korkeuden säätö



Työnnä työntökahvat vähintään runkoputkessa olevaan "MAX" -merkintään asti (**kuva 3**). Kiinnitä ne halutulle korkeudelle kääntämällä lukitusvipua myötapäivään. Säädä molemmat kahvat samalle korkeudelle. Työntökahvat on säädettävä liikesuunnan suuntaisesti!

⚠ Suurin sallittu kulma kahvan pituussuuntaisen keskilinjan ja liikesuunnan välillä on 0°.

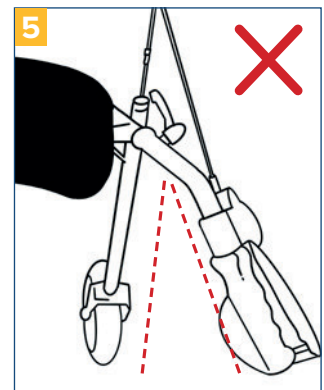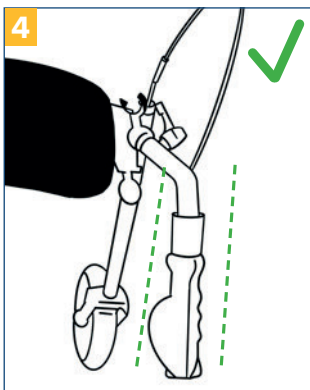

Lukitusvivun asentoa voidaan säätää vetämällä ja kääntämällä sitä samanaikaisesti. Jos haluat muuttaa työntökahvojen korkeusasentoa, käännä lukitusvipua vastapäivään kiinnityksen vapauttamiseksi. Lukitse sitten kahva halutulle korkeudelle edellä kuvatulla tavalla.

Jarrujen säätö

Jos jarrutusteho on heikko tai liian voimakas, jarrua voidaan säätää joko työntökahvassa olevasta jarrukotelosta (**kuva 6**) tai jarruvaijerissa olevalla säätöruuvilla (**kuva 7**) halutun jarrutustehon saavuttamiseksi.

Jarru on säädetty oikein, kun jarruvivussa ja jarruvaijereissa ei ole välystä ja pyörät pyörivät vapaasti, kun jarru on vapautettu.



Jarrutus | Pysäköinti

Kun haluat jarruttaa rollaattorin kanssa kävellessäsi, vedä molempia jarrukahvoja ylöspäin käsilläsi (**kuva 8**). Jarruta aina hitaasti ja paina yhtä paljon molemmilla käsillä.



Jarruta/pysäköi rollaattori painamalla molempia jarrukahvoja alaspäin, kunnes ne napsauttavat kuuluvasti paikalleen (**kuva 9**)! Vapauta jarru vetämällä molempia jarrukahvoja ylöspäin, kunnes ne vapautuvat (jarrukahvat ovat keskiasennossa).

Renkaiden kuluminen voi heikentää jarrutustehoa. Tarkista tästä syystä säännöllisesti jarrutuksen vaikutus.

Istuminen



Aseta rollaattori tasaiselle ja kiinteälle alustalle. Aktivoi sitten jarrut. Rollaattorin on oltava vakaa eikä se saa liukua. Istu vain pystyasennossa; älä nojaa taaksepäin (**kuva 10**)!

Istuma-asento on sallittu vain kuvan mukaisesti ja liikesuuntaa vastaan (**kuva 11**)!



Kokoontaittaminen | Kuljetus | Säilytys

Taita rollaattori vetämällä istuimesta ylöspäin! Kallista rollaattoria taaksepäin ja alaspäin sen liikkeen suuntaan. Runko taittuu silloin automaattisesti (**kuva 12**).

Irrota tarvikkeet tarvittaessa!



Puhdistus | Huolto

- Puhdista säännöllisesti kostealla liinalla!
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita!
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita!
- Älä käytä korkeapitoisia kloori- ja etikkapohjaisia puhdistusaineita!
- Desinfiointiin voidaan käyttää suihkutettavaa desinfiointiainetta, kuten Descosept AF tai Bacillol AF.
- Tarkista ruuvit säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa.
- Tuotetta ei saa altistaa yli 60° C:n lämpötiloille pitkäksi aikaa (esim. käyttö saunassa jne.)!
- Jos vikoja ilmenee, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tämän tuotteen!
- Tarkista renkaiden kunto säännöllisesti. Ne ovat "vikasietoisia", eli sinun ei tarvitse tarkistaa ilmanpainetta tai täyttää niitä ilmalla. Tarkista kuitenkin aina, ettei renkaissa ole repeämiä tai muita vaurioita.

Tekniset tiedot

Tuote	MIGO 2G
Tuotenumero	723600000
HMV (lääkinnällisten apuvälineiden rekisteri) ei	10.50.04.1200
Kokonaispituus	61 cm
Kokonaisleveys	58 cm
Kokonaiskorkeus	100 cm
Kahvan korkeus	80 - 100 cm
Kahvojen välinen leveys	44,5 cm
Istuimen leveys	36 cm
Istuimen syvyys	23,5 cm
Istuinkorkeus	60 cm
Takapyörien välinen leveys	43 cm
Mitat taitettuna	23 x 58 x 74 cm
Paino	8,3 kg
Maksimikuormitus	130 kg
Rungon materiaali	Teräksinen putki

Ihr Fachhändler:



Irrtum und Änderungen vorbehalten
Stan: 13.11.2024
Version: MDR-1.1

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny / Allgäu • Germany
T +49 7562 9724 0 • **F** +49 7562 9724 25
www.drivemedical.de • info@drivemedical.de