

Comfort-pyörätuoli Netti III & IIIHD



Valmistaja: AluRehab

Rungon materiaali: Alumiini

ph 6-8

Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen **huolellinen pyyhintä kostealla liinalla ja kuivaus.**

70%

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Comfort pyörätuoli Netti III on yksilöllisesti mitoittettava ja pyörätuolin varustelu valitaan yksilöllisesti jokaisen käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Netti III tuoteperheen tuoleissa on eniten yksilöllisesti valittavia varusteluvaihtoehtoja, jotka mahdollistavat monimutkaisimmatkin vaatimukset. Netti III tuoli on suunniteltu käyttäjälle, joka arvostaa miellyttävää ja muunneltavissa olevaa istuma-asentoa ja avustajille helppokäyttöisyyttä ja keveyttä tuolin liikutteluun.

Tuolissa on vakio-ominaisuuksina liukusäädöllä varustettu istuinlevy, asymmetrisestä säädettävät jalkatuen kiinnikkeet, tarrasäädettävä selkäosa ja laaja valikoima istuinkorkeuksia.

Liukusäädöllä varustettu istuinlevy mahdollistaa tuoliin siirryttäessä lantion saamisen aina hyvään asentoon istuimen perälle ja tuolista jalkojen kautta siirryttäessä turvallisen ja vakaan seisoma-asennon saavuttamisen. Liukusäätöä voi käyttää henkilön tuolissa istuessa. Asymmetrisesti säädettävät jalkatuet auttavat korjaamaan asentoa esimerkiksi lantiosta johtuvassa alaraajojen pituuserossa.


Netti IIIHD tuolissa on istuinkulman säätöä varten tuplakaasujouset tuomassa lisää tukevuutta ja vakautta tuolin käyttöön ja tuolin maksimi käyttäjäpaino on 160kg. Tuolissa on myös vakio-ominaisuutena Netti Grandis jalkatuet, jotka tarjoavat monipuoliset säädöt ja helpon käytettävyyden avustajalle.

Ominaisuuksia:

- Valittavissa työntökahvat tai työntötanko
- Valittavissa perusjarrut, 1- käden jarru, avustajan rumpujarrut
- Istuinlevy comfort tai istuinlevy liukusäädöllä
- Paljon erilaisia selkätyyny ja istuintyyny vaihtoehtoja
- Paljon erilaisia käsi- ja jalkatuki vaihtoehtoja
- Paljon erilaisia päätuki vaihtoehtoja
- Paljon erilaisia kuljetuspyörävaihtoehtoja 12 1/2" pyöristä 26" pyöriin
- Mahdollisuus 1- käden kelauslaitteeseen
- Paljon erilaisia tukipyörä vaihtoehtoja
- Mahdollisuus sijoittaa selkäosan ja istuinkulman kallistuksen säätövivut käsinojan alle, jotta käyttäjä voi itse säätää istuma-asentoaan
- Pyörätuoli soveltuu liikuntarajoitteisen henkilön kuljettamiseen ajoneuvossa (ISO 7176-19) mukaisesti

Tuotenumero	Tuote
NETTID20035	Netti III 35x40-50 cm
NETTID20038	Netti III 38x40-50 cm
NETTID20040	Netti III 40x40-50 cm
NETTID20043	Netti III 43x40-50 cm
NETTID20045	Netti III 45x40-50 cm
NETTID20050	Netti III 50x40-50 cm

Tuotenumero	Tuote
NETTID20035HD	Netti III 35x40-50 cm
NETTID20038HD	Netti III 38x40-50 cm
NETTID20040HD	Netti III 40x40-50 cm
NETTID20043HD	Netti III 43x40-50 cm
NETTID20045HD	Netti III 45x40-50 cm
NETTID20050HD	Netti III 50x40-50 cm
NETTID20055HD	Netti III 55x40-50 cm
NETTID20060HD	Netti III 60x40-50 cm

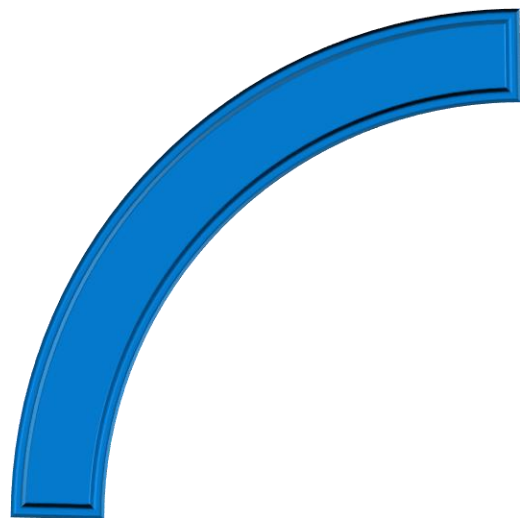

Tekniset ominaisuudet	Netti III & III HD
Istuinleveys	35 cm / 38 cm / 40 cm / 43 cm / 45 cm / 50 cm / 55 cm HD / 60 cm HD
Istuinleveyden säätö (optio)	2 x 25 mm / 2 x 12 mm
Istuinsyvyys (säädettävissä 2,5 cm:n välein)	40 – 50 cm / (52,5–57 cm HD-versio)
Selkäosan korkeus	50 – 60 cm
Selkäosan kallistus, portaattomasti	86° – 133°
Istuinkulman kallistus, portaattomasti	-9° – +16° (-15° – +30° HD-versio, optio)
Istuinkorkeus edestä 24” kuljetuspyörillä, ilman tyynyä	46 – 49 cm
Kokonaisleveys rumpujarrulliset kuljetuspyörät	Istuinleveys + 22 cm
Säärimitta, automaattinen pituuskompensaatio	32 – 68 cm
Käsitukien korkeus istuimen pinnasta	27 – 36 cm
Max. Kuormitus	135 kg / 160 kg HD-versio
Tuolin paino	36 kg
Törmäystestattu	ISO 7176-19 mukaisesti

